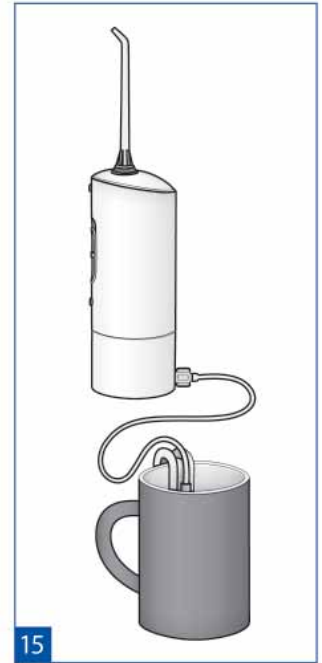
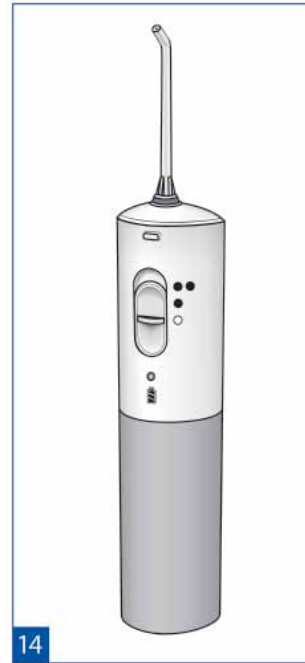
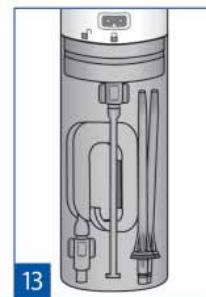
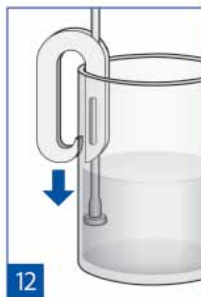
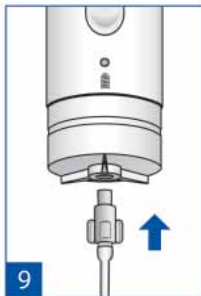
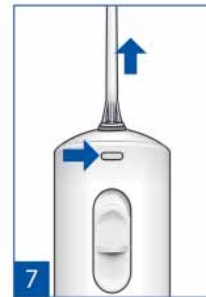
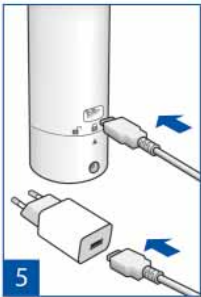
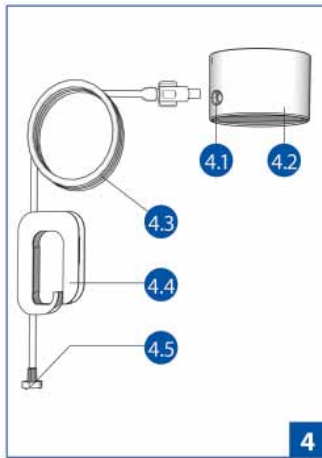
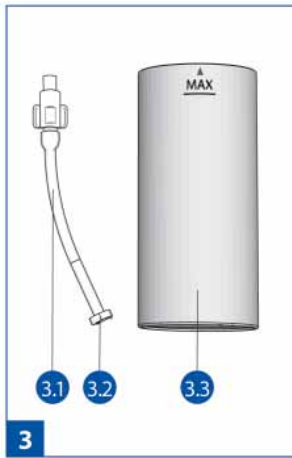
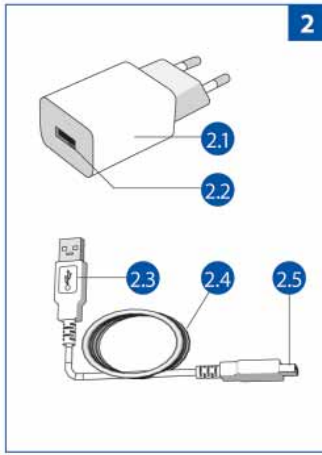
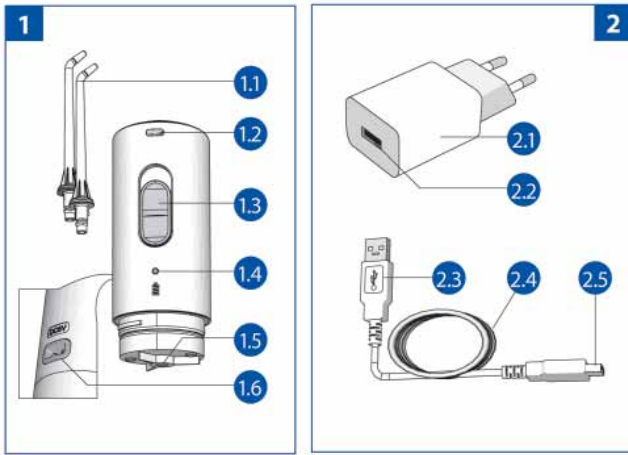


ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÄESOLEV JUHEND TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA SÄILITAGE SEE EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.

Käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutustehnika on jagatud järgmistesse kategooriatesse:

⚠ Ettehoiatus

Osutab nõuetele, mille mittetäitmine võib põhjustada traumat või vara kahjustumist.

🚫 On keelatud

Näitab keelatud toiminguid ja seadme kasutusvõtteid.

💡 Tähtis!

Näitab kohustuslikke toiminguid ja juhendeid, mida tuleb rangelt jälgida ohutu töö tagamiseks.

PÕHIDETAILID (JOON. 1)

Joonise nr	Nimetus
1.1	Otsik (Seadme komplekti kuulub kaks individuaalset otsikut värviiste rõngastega standardotsik LD-SA01)
1.2	Otsiku lahtiühendamise nupp
1.3	Režiimilüliti
1.4	Indikaator
1.5	Toru pesa
1.6	Toiteallika ühenduspesa
2.1	Toiteallikas
2.2	Toiteallika USB pesa
2.3	Toitekaabli USB pistik
2.4	Toitekaabel
2.5	Toitekaabli pistik
3.1	Lühike toru
3.2	Lühikese toru filter
3.3	Mahuti
4.1	Pika toru konnektori pesa
4.2	Konnektor
4.3	Pikk toru
4.4	Pika toru hoidik
4.5	Pika toru filter

⚠ Seadme ja otsiku korpus on valmistatud ABS plastikust, konteiner on valmistatud polüpropüleenist. Otsikud on läbinud biosobivuse testi. Nende materjalide vastu tundlikud inimesed peavad kasutama seadet ettevaatlikult.

Kompaktsus ja autonoomne akutoide lubavad kasutada irrigaatorit reisidel. Aku laadimine toimub toiteallika kaugu või teisest allikast, millel on USB pesa ning mis vastab jaos «Tehnilised näitajad» toodud nõuetele.

AQUAJET JA SUUÕÕNE TERVIS

Meie hambavahedesse ja hammastele tekkivas hambakatus kogunevad ja seal paljunevad arvukad bakterid. Nende elutegevuse käigus tekib hape, mis lagundab hambaemaili ja põhjustab igeme limaskesta põletikku.

Hambakroone, -proteese ja -aparaate on raske puhastada tavalisel teel, mille tagajärjel kogunevad haigustekitavad bakterid hambakrooni ääre ja igemevaos vahele. See viib hambakivi moodustumiseni ja suuõõne limaskesta põletikku.

KRääkides hammaste hooldamisest, keskendub suurem osa inimesi reeglina hammaste valgel värvil, unustades igemete tervise. Kuid kui jätta hambavahed ja igemevaod (hambakaela ja igeme vahel) puhastamata, tagajärjeks võib olla hambakivi, igemepõletik ja ebameeldiv lõhn suust. Põletikulise protsessi süvenemisel eemaldub ige hambast, lastes bakteritel tungida kuni lõualuudeni, mille struktuur pikapeale põletiku toimel laguneb. Luukoe vähenemise tagajärjel hakkavad kahanema ka igemed – hambad muutuvad silmnähtavalt pikemaks ja naeratus ei ole enam nii esteetiline. Kui igemed ja lõualuud ei suuda enam hambaid toetada, kukuvad need välja. Selliste haiguste raviks ja profülaktikaks sobib suurepäraselt suuõõne irrigaator AQUAJET. Eriehitusega otsik lubab veejoal tungida ka tavalise harja või hambaniidi jaoks ligipääsetamatusse kohtadesse. Tugev pulseeriv veejuga peseb välja toidujäägid, pehme hambakatu, ennetades varjatud kaariese tekkimist, masseerib igemeid ja kogu suuõõnt, parandades vereringet. See aitab ennetada parodontiiti, põletikulisi protsesse parodontites ja hammaste lagunemist.

OTSTARVE

Suuõõne irrigaator AQUAJET on ettenähtud parodontaalhaiguste, gingiviiti, parodontiiti raviks ja profülaktikaks, suuõõne limaskesta medikamentooseks loputamiseks ja massaažiks ning ortodontiliste aparaatide (sealhulgas hambakroonid, hambaproteesid, hambumuse parandamise aparaadid) ja hambavahede hooldamiseks.

AQUAJET-i kasutamine suuõõne hügieeniks ei asenda täielikult hambaharja. kasutage AQUAJET-i pärast iga söögikorda, et eemaldada suuõõnest toidujäägid ja tagada igemete sügav massaaž. Seejärel kasutage hammaste puhastamiseks samuti hambaharja.
Parodontiiti uuringu tulemused näitavad, et hambakivi moodustumise algstaadiume sageli eiratakse, kuna nendel ei ole selgeid tunnuseid. Tavaliselt lastakse haigusel progresseeruda tõsisemate staadiumiteni. Igemete veritsuse tekkimine pärast AQUAJET-i kasutamist osutab parodontiitile, kuid AQUAJET-i regulaarne kasutamine leevendab seda sümptomit ja mõnevõrra taastab igemete tervist. Kui veritsus kestab üle kahe nädala, konsulteerige oma hambaarstiga.

Potentsiaalsed tarbijad: kõik üle 2 aasta vanused isikud.

Funktsionaalsed näitajad: tugeva pulseeriva veejoo abil eemaldab seade toidujääke hambavahedest ja muudest raskesti ligipääsetavatest kohtadest, masseerib igemeid, parandab vereringet ja ennetab igemete veritsust. Tagab maksimaalse hambaproteeside ja -kroonide hoolduse, takistab haigustekitava mikroflora ja põletikuliste protsesside arengut hambaproteeside ja -kroonide kokkupuute kohas suuõõne limaskestaga, mida ei taga muud tavalised vahendid. Ennetab hambakivi, gingiviidi ja paljude parodontaalhaiguste tekkimist.

Kompaktsus ja autonoomne akutoide lubavad kasutada irrigaatorit reisidel. Aku laadimine toimub toiteallika kaugu või teisest allikast, millel on USB pesa ning mis vastab jaos «Tehnilised näitajad» toodud nõuetele.

Irrigaatori AQUAJET kasutamine laste poolt

Seadme kasutamine laste poolt on lubatud ainult täiskasvanu järelevalve all, kes on põhjalikult tutvunud käesoleva Kasutusjuhendiga.

Irrigaatori kasutamine laste poolt lubab vähendada stomatoloogiliste haiguste riski, lihtsustab suuõõne hooldamist, aga breketite kandmisel lühendab märkimisväärselt suuõõne hooldamiseks kuuluvat aega. Samuti on lapsed tihti peale kärsitud ja hammaste puhastamine ei ole nii põhjalik kui vaja. Irrigaatori kasutamine lubab aga parimal viisil teostada suuõõne hügieeni. Lapsed võivad alustada irrigaatori kasutamist samaaegselt iseseisva hambaharja kasutamisega. Vaatamata sellele, et suuõõne irrigaatori õige kasutamine ei saa suuõõnt traumeerida, enne kui irrigaatori kasutamist tuleks konsulteerida laste hambaarstiga.

Lapsed tohivad kasutada seadet ainult täiskasvanu järelevalve all, kes on käesoleva Kasutusjuhendiga hoolikalt tutvunud.
Ärge jätke seadme kõrvale imikuid ja väikseid lapsi järelevalveta, kuna seade sisaldab väikseid detaile, mida laps võib alla neelata.
Tagage piisav kontroll, kui töötava või väljalülitatud seadme kõrval on lapsed või keegi muu, kes vajab järelevalvet.

OHUTUSTEHNIKA NÕUETE TÄITMINE

Seadme ohutuks kasutamiseks lugege tähelepanelikult antud Kasutusjuhend läbi. Käesolevas jaos toodud nõuete mittetäitmine võib põhjustada erineva astmega kahjulikku mõju kasutajale ja teistele isikutele.

Elektriseadmete kasutamisel eriti laste läheduses järgige alati alltoodud ohutusnõudeid.

Ärge puudutage toiteallika juhtme pistikut niiskete kätega.
Enne seadme laadimist veenduge, et toiteallika juhe ei ole vigastatud.
Antud seadmel on sisseehitatud aku. Ärge visake seadet tulle, ärge soojendage seda ning ärge kasutage ega jätke seadet kõrge temperatuuriga ruumi.

Ärge asetage seadet vette.
Ärge kasutage seadet, olles vees.
Ärge asetage toiteallikat vette ja ärge peske seda veega.
Toiteallika juhe ei tohi puudutada kuumi või soojenevaid pindasid.
Kui seade on rikkis, ärge proovige seda iseseisvalt remontida. Pöörduge spetsialiseeritud töökotta.
Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta.
Kasutage ainult neid tarvikuid, mis on ettenähtud kasutamiseks selle seadmega ja kirjeldatud antud Kasutusjuhendis. Ärge kasutage tarvikuid, mis ei ole tootja poolt soovitatud.
Ärge asetage seadme avaustesse võõresemeid.
Kasutage seadet ainult suuõõne hoolduseks. Silmadesse, ninna, kõrvadesse või kurku suunatud veejuga võib põhjustada traumat.
Ärge kasutage seadmes vett, mille temperatuur ületab 40°C.
Hoidke seadet koduloomadele ja putukatele kättesaamatus kohas, et vältida infektsiooni sattumist seadmesse.
Seadme kasutamine laste poolt on lubatud ainult täiskasvanute järelevalve all.
adet ei tohi kasutada üheaegselt kõrgsageduslike kirurgiliste elektriseadmetega.
Probleemide vältimiseks seadmega ärge kasutage seda tugevate elektrimagnetväljade, kiirgustakistuste või nanosekundiliste impulssitakistuste lähedal. Näiteks magnetid, raadiosaatjad, mikrolaineahjud.
Kaasaskantavaid raadiosageduslikke kommunikatsiooniseadmeid (sh perifeersed seadmed, sellised nagu antennikaablid ja välisantennid) tuleb kasutada vähemalt 30 cm kaugusel mistahes suuõõne irrigaatori osast, kaasa arvatud valmistaja poolt märgitud kaablid.

Lülitades toiteallikat pistikupesast välja, hoidke alati kinni pistikust, mitte juhtmest. Pärast seadme kasutamist tühjendage mahuti ja lülitage seade 2-3 sekundiks sisse, kuni seade on täielikult kuiv.

Kasutusriskid

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikute poolt või isikute poolt, kellel puuduvad vastavad teadmised ja kogemus. Seadme kasutamine selliste isikute poolt on lubatud ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ning tingimusel, et tema on andnud selged seadmega töötamise juhendid. Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega.

Vastunäidustused: antud seadet ei tohiks kasutada inimesed, kes ei ole võimelised iseseisvalt seadet juhtima, ning inimesed tundliku suuõõnega. Eeldatavad kõrvalmõjud: kõrvalmõjusid leitud ei ole.

Paigalduskord ja nõuded ruumile

Ärge kasutage seadet saunades, dušikabiinides ning ruumides, kus pihustatakse aerosooli. Ärge jätke, ärge säilitage ja ärge kasutage toiteallikat seal, kus see võib kukkuda vette – vannitoas, WC-s jne. Ärge jätke seadet või selle osi kohtadesse, kus nende avaldavad mõju ekstreemtemperatuurid või niiskuse kõikumised, näiteks suvel transpordis või seal, kus nende paistavad otsesed päikesekiired.

AKU LAADIMINE

Seadmes kasutatakse pika tööeaiga taasklaetavat akut. Enne seadme esimest kasutamist tuleks laadida akut 4 tunni jooksul.
Laadimise ajal põhiplokk kergelt kuumeneb, kuid see ei ole rike.
Laadige akut toatemperatuuril 15-35 kraadi. Aku laadimisel madalama temperatuuriga ruumides võib seadme tööaeg lüheneda, aga temperatuuril alla 0 kraadi laadimine võib olla võimatu.
Kasutaja soovib kasutada toiteallikat LD-N064 (kuulub komplekti), kuid kasutades seadme komplekti kuuluvat toiteallika juhet, võite laadida seadet mistahes toiteallikast, kui sellel on USB pesa. Soovitavad näitajad vaadake jaost «Tehnilised näitajad».

Aku laadimiseks asetage toiteallika juhtme üks ots ^{2.5} seadme tagumises osas olevasse pesa ^{1.6}, aga juhtme teine ots ^{2.3} toiteallika USB pesasse ^{2.2}. Ühendage toiteallika pistik elektrivõrgu pistikupesasse (joon. 5).

Laadimisprotsessi näidatakse sinise indikaatoriga seadme kerel ^{1.4}. Pärast seda kui aku on täielikult laaditud, süttib roheline tuli.

Elektriohutuse eesmärgil ei saa seade üheaegselt töötada ja laadida akut.

Täiesti laaditud akuga võib seade töötada umbes 20 minutit maksimaalsel võimsusel. Aku madala laetustaseme korral süttib kollane tuli.

KASUTUSKORD

Piirist sisalduvate vedelike, suspensioonide sisalduvate vedelike, õlisegude ning muude vedelike kasutamine, mis ei ole ettenähtud kasutamiseks irrigaatoris, võib põhjustada irrigaatori riket!

Tootja soovib kasutada seadmes filtreeritud kraanivett.

Uue seadme sisemistes osades võivad olla destilleeritud vee jäägid, mida kasutati seadme katsetamisel. See ei ole rike ja on täiesti ohutu.

Otsiku ühendamine/lahtiühendamine

Seadme komplekti kuulub kaks individuaalset otsikut värviste rõngastega.

Lisaotsikuid saab soetada ka eraldi. Antud seadme jaoks ostke ainult otsikuid AQUAJET LD-SA01, AQUAJET LD-SA02 või AQUAJET LD-SA05.

Valige iga perekonnaliikme jaoks kindla värviga otsik. Kasutage ainult teie poolt valitud värvi otsikut.

Asetage otsik seadmesse kuni klõpsatuseni selliselt, et otsiku märk ühtiks irrigaatori käepidemel oleva soonega (joon. 6).

Otsiku lahtiühendamiseks vajutage lahtiühendamise nupp alla ja tõmmake otsikut, hoides seda soonte kohast kinni (joon. 7).

Soovitused otsiku turvaliseks lahtiühendamiseks:

1. Kui otsikut on irrigaatorilt raske lahti ühendada või vesi on teinud selle libedaks, kasutage kuiva riidetükki. Keerake otsiku ümber pehme puhas riidetükk ja korrake lahtiühendamise protseduuri.

2. Otsiku eemaldamisel tõmmake seda allapoole. ÄRGE KEERAKE otsikut mööda telge. Otsiku keeramine võib põhjustada selle purunemist.

Irrigaatori kasutamine komplekti kuuluva mahutiga (joon. 14).

Eemaldage konnektor 4.2. Selleks keerake seda nii, et märk ▲ oleks asendis 1 (»avatud») ja tõmmake allapoole (joon. 8).

Asetage lühikese toru pistik 6.1 seadme alumises osas olevasse pesasse 1.5 (joon. 9).

Täitke mahuti sooja veega MAX märgini.

Ühendage mahuti seadmega (joon. 10) ja keerake seda nii, et märk ▲ oleks asendis 2 (»sulatud»).

Seade on kasutusvalmis. Veega maksimaalse tasemeni täidetud mahuti tühjeneb 40 sekundiga.

- 

Ärge kasutage seadet ilma veeta.
- 

Kui seadet liiga palju kallutada, siis filtri toru 3.2 võib ulatuda veest välja, mille tagajärjel veevool lõpeb.

Double Aqua Flow system – Irrigaatori kasutamine koos teiste mahutitega (joon. 15).

Kui mahuti maht on teie jaoks ebapiisav, siis võite kasutada ka muid veemahuteid, näiteks tavalist klaasi.

Kui konnektor on ühendatud seadmega (joon. 11), asetage pika toru pistik konnektori tagumises osas 4.2 asuvasse pesasse 4.1 või, kui konnektor ei ole seadmega ühendatud (joon. 9), siis seadme alumises osas olevasse pesasse 1.5.

Kerige pikk toru 4.3 lahti ja asetage toruhoidik 4.4 sooja veega täidetud mahutile selliselt, et toru filter 4.4 ei ulatuks natuke mahuti põhjani (joon. 12).

Seade on kasutusvalmis. Seade ei tohi töötada üle 5 minuti järjest.

- 

Enne esimest kasutamist täitke mahuti sooja veega, lükake režiimilüliti asendisse «●●», et vesi täidaks kõik sisemised õõnsused. Seade on kasutusvalmis, kui mahutis olnud vesi on täielikult ära kasutatud.
- 

Veenduge, et mahutis oleva vedeliku temperatuur ei ületa 40°C. Ärge kasutage kuumu vett, kuna suuõõne limaskest on väga tundlik ja liiga kuum vesi võib seda traumeerida.

Kasutamine

Kumardage valamu kohale. Asetage otsiku ots hammaste või igemete ligidale. Hoidke suu paakil, et vesi voolaks valamusse. Suunake otsik alumise hambarea tagumistele hammastega risti.

Lülitage seade sisse, lükates režiimilüliti 1.3 asendisse «●» (keskmine surve) või asendisse «●●» (tugev surve).

Aeglaste liigutustega puhastage hambavahet 4-5 sekundit, peatades juga igemete juures. Seejärel liikuge mööda igemejoont hamba alumises osas kuni järgmise hambavaheni. Korrake samad liigutused, mis esimese hambavahe puhastamisel (joon. 16, punktiirjoon näitab veega töödeldavat kohta, pidev nool näitab otsiku liikumissuunda).

- 

Te võite panna vee kinni, lükates režiimilüliti asendisse «○» – »Välja lülitatud». Ärge suunake juga nurga all vahetult igemetaskusse, proovige hoida juga risti hambareaga.

Korrake protseduuri kõikide hambavahedega alumise hambarea välis- ka siseküljel. Seejärel korrake protseduuri ülemise hambarea välis- ja siseküljel. (joon. 17)

Juhul kui teil on paigaldatud ortopeedilised konstruktsioonid, nende kokkupuutekohti igeme, hammaste või muude hambaaparaatidega tuleb pesta eriti hoolikalt. Soovitav on konsulteerida hambaarstiga antud konstruktsiooni olemasolevate pesukanalite osas.

- 

Pärast 10-minutit pidevat töötamist lülitub seade automaatselt välja ja roheline indikaator vilgub. Ärge kasutage seadme vähemalt 10 minuti jooksul, et sisemised mehhanismid jahtuda.
- 

Pärast igat kasutuskorda tühjendage veemahuti. See ennetab bakterite paljunemist.

Lülitage seade välja, lükates režiimilüliti 1.3 asendisse «○», eemaldage otsik, mahuti ja toru. Peske kõik sooja jooksva veel all läbi ja pühkige kuiva riidetükiga ära. Seadme mugavaks säilitamiseks ja transportimiseks asetage tarvikud seadme mahutisse ja ühendage see põhiplokiga (joon. 13).

Aku kasutamine

Kirjeldus: seadmes kasutatakse pika tööeaiga taaskasutatavat akut.

Aku tööiga: 3 aastat õige kasutuse korral.

Soovitused: kasutamise ajal laske akul täielikult tühjaks minna, et mitte tekitada mälu efekti, mille juures täisaku tööaeg lüheneb. Pikemal säilitamisel on soovitatav jätta aku laetuse tasemeks 70-80%.

Aku hooldus: ei nõua.

Aku vahetus: vajadusel teostatakse aku vahetust ainult spetsialiseeritud teeninduskeskustes.

Ligipääsuks akule tuleb eemaldada režiimilüliti, võtta lahti konnektor, keerata välja 3 põhiploki alumises osas olevat kruvi (sulgurite all) ja võtta sisemine osa välja.

Aku mark ja mudel: GP 130AAHV2B6

GARANTIIOHUSTUSED

Käesoleval seadmele kehtib garantiiperiood 24 kuud müügi kuupäevast. Garantiiohustused vormistatakse garantiitalongina seadme müümisel ostjale. Garantiiteenindust teostatavate ettevõtete nimes on toodud ära garantiitalongis.

HOOLDUS, SÄILITAMINE, REMONT JA UTILISEERIMINE

1. Pärast igat kasutuskorda seadet on soovitatav puhastada.

2. Enne seadme puhastamist ühendage toitejuhe lahti. Puhastage seadet niiske lapiga. Mahuti, torud ja otsikud on pestavad nõudepesumasinas. Ärge kasutage seadme puhastamiseks karedaid kangaid, harju ja abrasiivseid vahendeid.

3. Kasutage ainult pehmeid puhastusvahendeid. Ärge kunagi kasutage lahusteid, bensiini või piiritust, kuna need võivad kahjustada seadet või seadme osasid.

4. Kaitske seadet otsese päikesevalguse eest.

5. Ärge säilitage ega kasutage seadet küttekahade ja lahtise tule vahetus läheduses.

6. Kaitske seadet mustuse eest.

7. Vältige seadme kokkupuudet agressiivsete lahustega.

8. Vajadusel teostage remonti ainult spetsialiseeritud ettevõtetes.

9. Antud seadme tootja määratud tööiga on 7 aastat valmistamise kuupäevast tingimuse, et seadet kasutatakse ainult vastavalt käesolevale kasutusjuhendile ja rakendatavatele tehnilistele standarditele. Valmistamiskuu ja -aasta on toodud ära LOT numbris (esimesed kaks numbrit on kuu, teised kaks on aasta). Otsikute tööiga on 1000 kasutustsükli. Nimetatud tööea möödumisel tuleks teostada regulaarselt seadme tehnilise seisundi kontrollimist, pöördudes selleks spetsialiseeritud remondiettevõtetesse. Vajadusel nemad ka utiliseerivad seadme vastavalt teie regioonis kehtivatele utiliseerimisreeglitele.

10. Antud seadmes kasutatakse nikkel-metallhüdriidikut. Palun, jälgige, et akud oleksid utiliseeritud ametlikus vastuvõtupunktis, kui sellised on teie riigis olemas.

- 

Ärge muutke seadme konstruktsiooni ilma tootja loata. Seadmeid tuleb hooldada ainult autoriseeritud hoolduskeskustes või tootja juures.

Järgmised hooldus- ja remondiliigid võivad olla teostatud ainult kasutaja poolt või autoriseeritud hoolduskeskuses:

Remont ja hooldus	Kes teostab
Toru vahetus	Kasutaja
Tarvikute vahetus	Kasutaja
Laadija või toitejuhtme vahetus	Kasutaja
Igapäevane puhastus ja desinfitseerimine	Kasutaja
Mistahes osad, mille vahetamiseks tuleb seadet lahti võtta.	Autoriseeritud hoolduskeskus või Ametlik esindaja

TEHNILISED NÄITAJAD

Partii number LOT	 LDA3
Mudel	LD-A3
Tarbitav võimsus	6 W
Aku maht	2x1250 mA/h
Aku tööiga	umbes 3 aastat*
Veesurve:	
surveregulaator on asendis «●» (keskmine)	umbes 390 kPa (3 kgs/cm2)
surveregulaator on asendis «●●» (tugev)	umbes 590 kPa (5 kgs/cm2)
Surve reguleerimine	2 asendit (keskmine, tugev)
Veejoa pulseerimissagedus	1500 impulssi/min
Katkematu tööaeg	5 minutit
Seadme jahtumiseks vajalik aeg	vähemalt 5 minutit
Mahitu täismahu kasutamise aeg	umbes 40 sekundit
Komplektis	põhiplokk, konnektor, mahuti, otsik AQUAJET LD-SA01 (2 tk), pik toru hoidjaga, lühike toru, toiteallikas LD-N064, toiteallika juhe, kasutusjuhend, garantiitalong, individuaalne papp-pakend.
Mahuti maht vähemalt	160 ml.
Seadme kasutustingimused:	
õhutemperatuur	+10°C... +35°C
õhuniiskus	mitte üle 80% Rh
õhurõhk	86 – 106 kPa
Seame säilitamis- ja transporditingimused:	
õhutemperatuur	- 10°C...+ 40°C
õhuniiskus	95% Rh
õhurõhk	50 – 106 kPa
Müratase	alla 65 dB
Irrigaatori kaitseaste	IPX5
Toiteallikas LD-N064 (kuulub komplekti)	
Väljundpinge	5 V
Maksimaalne võimalik vool	500 mA
Nimipinge	100-240 V/50 Hz
Välismõõtmed	54,5 (k) x 50 (l) x 220,5 (s) mm.
Kaal (pakendita)	350 g

* Aku tööiga sõltub seadme kasutus- ja hoiutingimustest.

Pärast seadme transportimist liiga madalal või liiga kõrgel temperatuuril tuleb hoida seadet vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.

Käesoleva Kasutusjuhendi redaktsiooni kuupäev on toodud ära viimasel lehel järgmisel kujul
 XXXX/YYMM/NN, kus YY on aasta, MM on kuu, NN on redaktsiooni number.

Sümbolite seletus:

CE₀₁₂₃ Vastavus direktiivile 93/42/EEC
IPX5 Kaitseklass IP



Tähtis: Tutvuge juhendiga Utiliseerimisel juhinduge teie regioonis kehtivatest reeglitest.



 Tähtis: Tutvuge juhendiga

 Seadme tüüp B

☐ Elektrihutusklass II

LOT LOT number on toodud korpusel kui
MMYYXXXX, kus MM on seadme
valmistamiskuu, YY on valmistamisaasta,
XXXX seadme mudeli number.

Indikaatori signaalide selgitus:

Indikaatori värv	Tähendus
Roheline	Aku on täis laaditud. Seade töötab.
Roheline vilkuv	Automaatne väljalülitus. Seadme jahutamiseks kulub 10 minutit.
Kollane	Madal aku laetustase
Sinine	Aku laadimine

TÜÜPILISED RIKKED

Probleem	Põhjus	Kõrvaldamise viis
Seade ei tööta	Aku on tühi	Laadige aku
Kompressor töötab, kuid vett ei tule	Mahutis ei ole vett	Täitke mahuti veega
	Toru ots on veetasemest kõrgemal	Lisage vett, et toru ots oleks vee all
	Seade on kallutatud liige suure nurga all, lühikese toru ots on veest väljas	Ärge kallutage seadet liiga palju
Liiga väike surve	Lühikese/pika toru filter on ummistunud	Peske filter jooksva vee all läbi
	Pikk toru on keerdus	Tehke pikk toru sirgeks

Kui eeltoodud soovitusitele vaatamata seade ei tööta, lülitage see välja ja pöörduge tehnilist hooldust teostava ettevõtte poole (garantiieetevõtete aadressid ja telefonid on toodud ära garantiitalongis). Ärge proovige ise irrigaatorit remontida.

Seadmete tootmine vastab rahvusvahelisele standardile ISO 13485. Seade vastab Euroopa direktiivile MDD 93/42/EEC ning IEC 601-1-88, IEC 60601-1-2 nõuetele.

Toodetud Little Doctor International (S) Pte jaoks ja kontrolli all. Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, Singapore 188307, Singapore)

Tootja: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591. Postal Address: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699)

Esindaja Euroopa Liidus: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)

Lisainfo: <http://aquajet.sg>

EST

GARANTIITALONG

LD-A3

MUDEL

MÜÜGIKUUPÄEV

PARTII NUMBER LOT

OSTJA NIMI

Müügiettevõtte pitsat (tempel)

Müüja allkiri

Täidab volitatud hooldusettevõtte esindaja

Kuupäev	Garantiihoolduse teostamise märg

CE 0123 IPX5



® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Singapore).
© Copyright Little Doctor International (S) Pte Ltd., 2021.