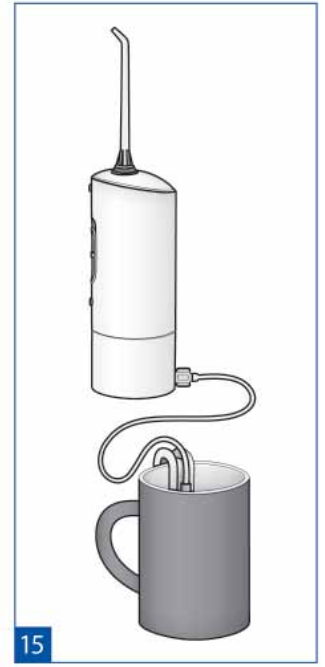
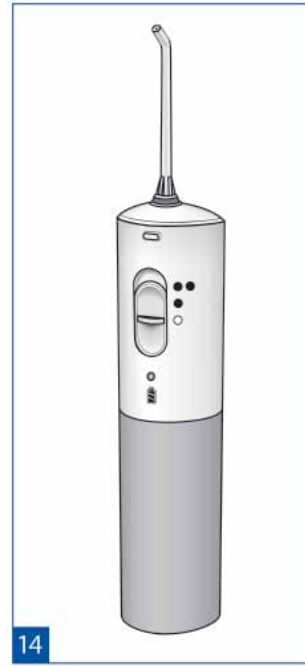
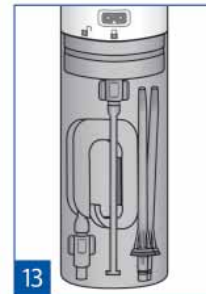
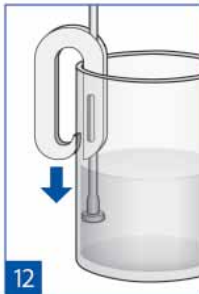
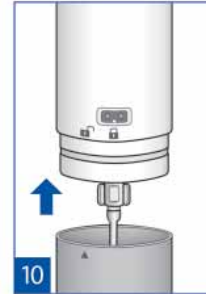
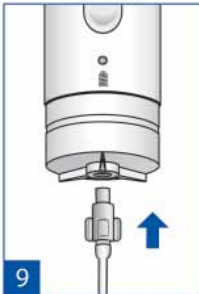
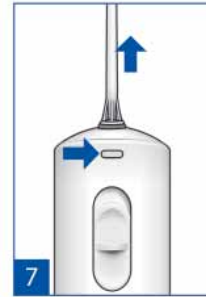
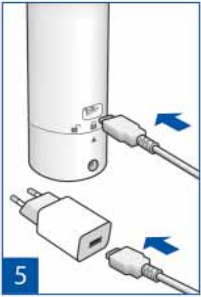
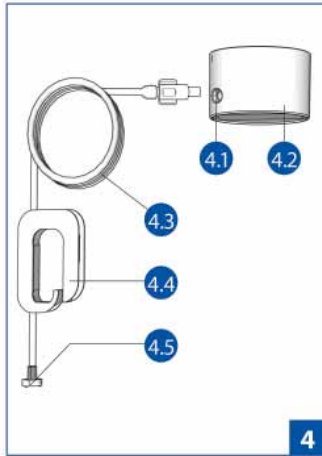
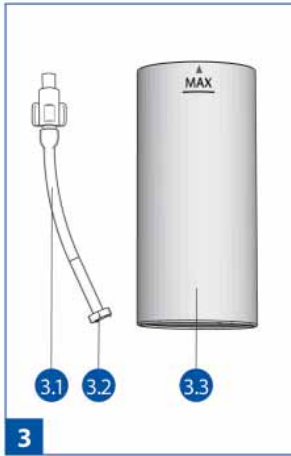
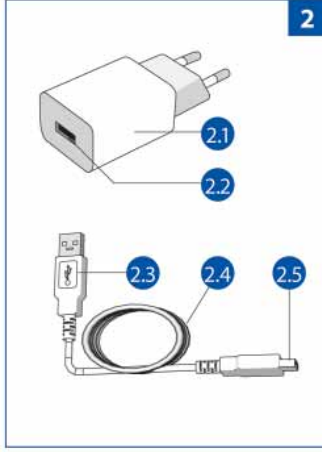
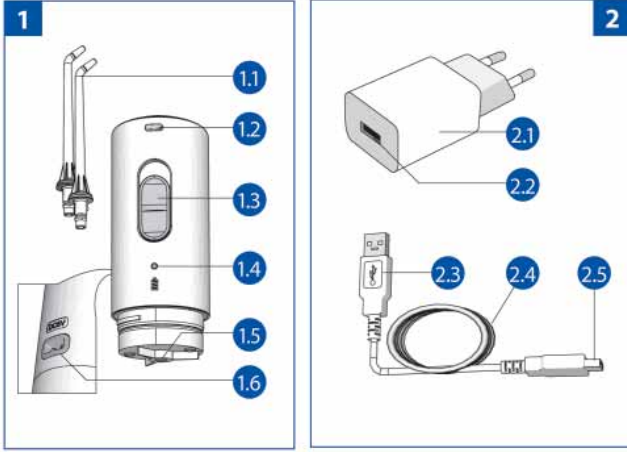


CIHAZI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE İLERİDE İNCELEMELİK İÇİN SAKLAYINIZ.

Güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgiler bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki kategorilere göre verilmektedir:

⚠ Uyarı

Uygulanmadığı takdirde travmalara yol açabilen veya cisimlere zarar verebilen şartları kapsamaktadır.

⛔ Yasak

Yasak olan işlem ve cihaz kullanım yöntemlerini belirtir.

❗ Önemli!

Cihazın güvenli çalışmasını sağlamak için mecburen yerine getirilmesi gereken işlem ve talimatları belirtir.

ANA BÖLÜMLER (ŞEKİL 1)

Resim No	Cins
1.1	Başlık (2 adet, LD-SA01 standart başlığı)
1.2	Başlık çıkartma düğmesi
1.3	Rejim değiştirme anahtarı
1.4	Endikatör
1.5	Boru yuvası
1.6	Elektrik kaynağı bağlama yuvası
2.1	Elektrik kaynağı
2.2	Elektrik kaynağının USB-prizi
2.3	Elektrik kablosunun USB-fişi
2.4	Elektrik bağlama kablosu
2.5	Elektrik bağlama kablosunun fişi
3.1	Kısa boru
3.2	Kısa boru filtresi
3.3	Konteyner
4.1	Uzun boru konektör yuvası
4.2	Konektör
4.3	Uzun boru
4.4	Uzun boru tutucusu
4.5	Uzun boru filtresi

❗ Cihaz ve başlık gövdesi ABS plastiğinden, konteyner ise polipropilenden üretilmiştir. Başlıklar biyolojik uyumluluk testinden geçti. Belirtilen malzemelere aşırı duyarlılık duyan insanlar cihazı kullanırken özen göstermelidir.

Kompakt boyut ve bağımsız akülü besleme sayesinde irigatör, gezi ve seyahatlerde kullanılabilir. Akü, elektrik kaynağı (EK) veya USB prizi olan, "Teknik özellikler" bölümünde belirtilen parametrelere sahip olan diğer elektrik kaynağından şarj edilebilir.

AQUAJET VE AĞIZ SAĞLIĞI

Dişler arasındaki boşluk, bakterilerin toplanma ve çoğalma yeridir. Bakteriler yumuşak diş plağında yaşar ve onların faaliyetlerinin sonucunda diş minesini bozan ve diş eti mukozasının iltihaplanmasına neden olanasit oluşur.

Diş taşları, takma dişler ve diş aparatlarının genel yöntemlerle temizlenmesi zordur. Böylece diş taci kenarı ile periodontal oluk arasında patojen bakteriler toplanır. Neticede diş taşları ve ağız içi mukozasında bozulmalar oluşur.

Diş bakımı konusu açıldığında birçok insan, kural olarak dişlerin "beyazlığına" odaklanır; diş etlerinin sağlıklı vaziyetini önemsemez. Dişler arasındaki boşluğu ve periodontal olukları (diş boynu ile diş eti arasındaki alan) temizlemediğimiz durumda zamanla diş taşları birikir, diş etleri kızarır ve hoş olmayan bir ağız kokusu meydana gelir. Enflamasyon süreci gelişirken diş eti dokusu zamanla dişten ayrılarak bakterilerin derine, çene kemiklerine kadar inmesine müsaade eder. Çene kemiklerinin yapısında da enflamasyon esaslı bozulmalar oluşur. Kemik dokusu azaldığı için diş etleri de inmekte, dişler daha uzun görünmekte ve gülümsemenin estetiği bozulmaktadır. Dişler diş etleri ve çene kemikleri ile iyice desteklenmediği durumda diş düşmesi meydana gelir.

Bu tür hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için AQUAJET irigatörüne ihtiyaç vardır. Başlığın özel yapısının sayesinde su jeti, diş fırçası veya ipinin temizleyemediği alanlara ulaşmaktadır. Yüksek palslı su basıncı, gıda kalıntılarını ve yumuşak diş plağı temizleyerek gizli çürüme boşluklarının oluşumunu engeller, diş etleri ve ağız boşluğunun tamamını ovar, kan dolaşımını iyileştirir. Böylece periodontal hastalığı, parodontta enflamasyon süreçleri ve diş hasarını engeller.

KULLANIM AMACI

AQUAJET ağız boşluğu irigatörü; periodontal hastalıkları, diş eti iltihabını, periodontiti önlemek, tedavi etmek, ağız içi mukozasının ilaçlı sulamasını yapmak, mukozaya masaj yapmak ve ayrıca diş aparatlarının (diş taci, implant, takma dişler, ısırık düzeltme aparatı dahil) bakımını yapmak ve dişler arasındaki boşlukları temizlemek için üretilmiştir.

Ağız içi hijyeni bakımından AQUAJET diş fırçası, tüm görevleri yerine getiremez. AQUAJET'i yemekten sonra gıda artıklarını gidermek, diş etlerine kaliteli masaj yapmak için kullanınız. AQUAJET'ten sonra dişleri fırça ile temizleyiniz.

Periodontal hastalık konusunda yapılan araştırmalara göre diş taşının başlangıç safhaları, net belirtiler olmadığı için çoğu zaman ihmal edilmektedir. Genellikle hastalığın daha ciddi safhalarına ilerlemesine müsaade edilmektedir. AQUAJET kullanımından sonra meydana gelen diş eti kanaması periodontal hastalığın bulgusudur, fakat AQUAJET uzun zaman kullanıldığında bu bulgular hafifler ve diş etleri sağlıklı hale döner. Kanama iki haftadan fazla devam ettiği takdirde diş hekiminize başvurunuz.

Potansiyel kullanıcılar – 2 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler.

Fonksiyonel özellikler: yüksek basınçlı palslı su jeti diş arasındaki boşluklardan ve ağız içindeki diğer gizli alanlardan gıda kalıntılarını temizler, diş etlerini ovar, kan dolaşımını iyileştirir ve diş etlerinin kanamasını engeller.

Cihaz, takma dişlerin ve diş taşlarının bakımını en iyi şekilde yapar, takma dişlerin ve diş taşlarının ağız içi mukozasıyla temas ettiği alanlarda, sıradan araçların yerine getiremediği patojen mikroorganizmalar ve enflamasyon süreçlerinin gelişmesini engeller. Cihaz; diş taşları, gingivitis ve diğer periodontal hastalıkların oluşumunu engeller.

Kompakt boyut ve bağımsız akülü besleme sayesinde irigatör, gezi ve seyahatlerde kullanılabilir. Akü, elektrik kaynağı (EK) veya USB prizi olan, "Teknik özellikler" bölümünde belirtilen parametrelere sahip olan diğer elektrik kaynağından şarj edilebilir.

AQUAJET irigatörünün çocuklar tarafından kullanımı

Çocuklar, bu cihazı ancak bu kullanım kılavuzunu detaylı olarak inceleyen yetişkinlerin yanında olduklarında kullanabilirler.

İrigatörün çocuklar tarafından kullanılması diş hastalıkları riskini düşürür, ağız boşluğunun bakımını kolaylaştırır, braket sistemleri takıldığında ise ağız içini temizleme süresini birkaç kat azaltır. Çocuklar, dişlerin iyice temizlenmesi konusunda genelde yeterli sabrı ve gayreti göstermezler.

İrigatörün kullanımı ise ağız içi hijyenin en iyi düzeyde olmasını sağlar.

Çocuklar, dişlerinin kendilerinin fırçalayabilmeye başladıkları dönemde irigatörü kullanmaya başlayabilirler.

İrigatör doğru olarak kullanıldığında ağız boşluğuna zarar vermemesine rağmen, cihazı birinci defa çalıştırmadan önce çocuk diş hekimine danışınız.

Çocuklar cihazı ancak bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyan yetişkin yanında olduğunda kullanabilirler.
Cihazı bebek ve küçük çocukların bulunduğu ortamlarda bırakmayınız, çünkü cihazda çocukların yutabileceği birçok küçük parçalar yer almaktadır.
Çalışan veya söndürülen cihazın yanında çocuklar veya bakıma ihtiyaç duyan diğer kişiler bulunduğu gerekli kontrolü sağlayınız.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI

Cihazı güvenli şekilde kullanmak için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu bölümde belirtilen şartların uygulanmaması, kullanıcı ve çevredeki insanlar açısından farklı düzeylerde tehlikeli etkiler oluşturabilir.

Özellikle çocukların yanında elektrikli cihazları kullandığınızda, aşağıda açıklanan genel güvenlik tedbirlerine her zaman uyun.

Elektrik kaynağının kablo fişine ıslak ellerle dokunmayın.
Cihazı şarj etmeden önce elektrik kaynağının kablusunda herhangi bir zedelenmenin olmadığından emin olun.
Cihazda gömülü akü mevcuttur. Cihazı ateşe atmayın, ısınmasına müsaade etmeyin ve ayrıca sıcaklık derecesi yüksek olan ortamlarda bırakmayın.

Cihazı suya koymayın.
Cihazı banyo yaparken kullanmayın.
Elektrik kaynağını suya koymayın ve suyla yıkamayın.
Elektrik kaynağının kablolu sıcak veya ısıyan yüzeylerle temas etmemelidir.
Cihazın çalışmadığı durumlarda cihazı kendiniz tamir etmeyi denemeyin.
Uzman tamir merkezine başvurun.
Cihazı çalışır vaziyette bırakmayın.
Cihaz ile birlikte ancak onun için öngörülüp kullanım kılavuzunda belirtilen gereçleri kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen gereçleri kullanmayın.
Cihaz yuvalarına yabancı cisimler sokmayın.
Cihazı yalnızca ağız boşluğunun bakımı için kullanın. Göz, burun, kulak veya boğaza yönlendirilen su jeti travmaya neden olabilir.
Sıcaklığı 40°C'den yüksek olan suyu cihaz için kullanmayın.
Enfeksiyon bulaşmaması için cihazı evcil hayvanlar ve böceklerin ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
Yanında yetişkin olmadan çocuklar cihazı kullanamaz.
Cihaz YF'lı (yüksek frekanslı) elektrikli cerrahi ekipmanı ile birlikte kullanılmaz.
Cihaz ile ilgili sorunları önlemek için onu güçlü elektromanyetik alanlar, yayılan engeller veya nanosaniyelik darbelerin yanında çalıştırmayınız. Örneğin, miknatıslar, radyo vericileri, mikrodalga fırınları.
(Anten kabloları ve diş antenler gibi çevre birimleri dahil olmak üzere) tüm taşınabilir radyo frekanslı iletişim ekipmanları üretici tarafından belirtilen kablolar dahil ağız içi irigatörün herhangi parçaya en az 30 cm mesafede çalıştırılacaktır.

Elektrik kaynağını prizden çıkartırken kabloyu değil, fişi tutun.

Cihazı kullandıktan sonra tankta kalan suyu boşaltın ve cihazı tamamen kurutmak için 2-3 saniye çalıştırın.

Kullanım riskleri

Fiziki, duyuşal veya zihinsel özellikleri sınırlı olan veya gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişiler cihazı kullanamazlar.

Bu kişiler, cihazı ancak onların güvenliğinden sorumlu olan, bu kişilere cihazın çalışmasıyla ilgili net kullanım talimatları veren kişinin eşliğinde çalıştırabilirler. Çocukların cihaz ile oynamasını engelleyin.

Kontrendikasyonlar: cihazı tek başına yönetemeyen ve ağız boşluğunun duyarlılığı yüksek olan kişiler cihazı kullanamazlar.

Beklenen yan etkiler: beklenen yan etkiler tespit edilmedi.

Kurulum usulü ve ortam için uygulanan şartlar ile ilgili bilgiler
Cihazı banyo, WC, duş kabinleri ve ayrıca aerosol püskürtülen mekanlarda kullanmayın. Elektrik kaynağı suya düşebilecek banyo, WC gibi ortamlarda bırakmayın ve saklamayın.
Cihazı ve onun parçaları yüksek sıcaklık ve nem oranı devamlı değişen ortamlarda ve direk güneş ışınlarının etkisi olan yerlerde bırakmayınız. Yazın taşıtlar bu tür ortamların örneğidir.

AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ

Cihazda birçok defa şarj edilebilen ve uzun süreli kullanıma uygun akü bulunmaktadır.
Cihaz, ilk kez çalıştırılmadan önce 4 saat şarj edilecektir.

Şarj esnasında ana ünite hafifçe ısınmaktadır, fakat bu durum arıza sayılmamaktadır.

Aküyü oda sıcaklığı 15-35 olduğunda şarj edin. Akü belirtilen düzeyden daha düşük sıcaklık ortamında şarj edildiğinde cihazın çalışma süresi azalabilir; sıcaklık 0 dereceden düşük olduğunda şarj işlemi gerçekleşmeyebilir.

Üretici LD-N064 elektrik kaynağını kullanmayı önermektedir (takımda mevcuttur), fakat ürün takımında yer alan elektrik kaynağının kablolu USB prizi olan herhangi bir elektrik kaynağından şarj edebilirsiniz. Önerilen parametreler "Teknik özellikler" bölümünde belirtilmiştir.

Aküyü şarj etmek için elektrik kaynağı kablusunun bir ucunu 2.5 cihazın arka bölümündeki prize 1.6, kablounun diğer ucunu ise 2.3 elektrik kaynağının USB prizine 2.2 takın. Elektrik kaynağı fişini şebeke prizine takın (şekil 5).

Şarj süreci cihaz gövdesindeki mavi göstergede 1.4 belirtilmektedir. Akü tamamen dolduktan sonra göstergede yeşil ışık yanar.

Elektrik güvenliğinin sağlanması için, cihaz çalışırken akünün şarj edilmesi mümkün olmamaktadır.

Akü tamamen doluyken cihazın maksimum kapasiteyle çalışma süresi yaklaşık 20 dakikadır.
Akü şarjı düşükken indikatörde sarı ışık yanmaktadır.

KULLANIM USULÜ

Alkol, parçacık içeren sıvıların, yağlı sıvıların ve cihaz için öngörülmemen diğer sıvıların kullanımı irigatörün bozulmasına neden olabilir!

Üretici, irigatör için filtrelenen musluk suyu kullanılmasını önermektedir.

Yeni cihazın iç parçalarında testler için kullanılan damıtılmış su kalıntılar olabilir. Bu durum arıza sayılmamaktadır ve güvenlik açısından sakıncası yoktur.

Başlığı takma / çıkartma

Cihazın takımına kenarları farklı renkte 2 özel başlık dahil edilmiştir.

İlave başlıklar ekstra bir ücret karşılığında satın alınabilir. Bu cihaz için sadece AQUAJET LD-SA01, AQUAJET LD-SA02 veya AQUAJET LD-SA05 başlıkları alın.

Her aile ferdi için ayrı belirli renkli başlığı seçin. Her zaman sadece size ait olan, seçtiğiniz renge sahip başlığı kullanın.

Başlığı tık edinceye kadar cihaza yerleştirerek başlığın yön rayını irigatör kolundaki oluk ile çıkıştırın (şekil 6).
Başlığı çıkartmak için çıkartma düğmesine basıp başlığı kertikler alanında tutarak çekin (şekil 7).

Başlığın güvenli olarak çıkartılması ile ilgili tavsiyeler:

1. Başlığın irigatörden düzgün çıkmadığı veya su nedeniyle elde kaydığı durumlarda kuru bez kullanın. Başlığı yumuşak kuru bezle sarın ve yeniden çıkartmayı deneyin.
2. Başlığı irigatörden çıkarttığınızda eksen etrafında DÖNDÜRMEDEN çekin. Başlığın dönmesi zedelenmesine neden olabilir.

İrigatör, takıma dahil edilen konteyner veya ayrı bir su tankı ile kullanılabilir.

İrigatörün takıma dahil edilen konteyner ile kullanımı (şekil 14)

Konektörü çıkartın 4.2. Bunun için konektörü gösterge ▲("açık") □ durumdayken döndürün ve aşağı çekin (şekil 8).

Kısa boru fişini 4.1 cihazın alt bölümündeki yuvaya 1.5 yerleştirin (şekil 9).

Konteynere MAX hizasına kadar ılık su doldurun.

Konteyneri cihaza bağlayın (şekil 10) ve göstergen □ ("kapalı")▲ pozisyona gelinceye kadar döndürün.

Cihaz kullanıma hazırdır. Tamamen doldurulan konteyner 40 saniyelik çalışmada boşalır.

⚠ Cihazı sıvısız kullanmayın.

! Cihazı konteyner ile birlikte kullanırken gereğinden fazla eğdiğinizde boru filtresi 3.2 sudan çıkabilir ve su beslemesi durur.

Double Aqua Flow system – İrigatörün diğer tanklarla kullanımı (şekil 15)

Konteyner hacmi sizin için yetersiz ise, cihaza diğer su tankları, örneğin normal bir su bardağı takılabilir.

Bunun için, konektör cihaza bağlıysa (şekil 11) uzun boru fişini konektörün arka bölümündeki 4.2 yuvaya 4.1 takın. Konektör cihaza bağlı değilse (şekil 9), söz konusu fişi alt bölümündeki 1.5 yuvaya takın.

Uzun boruyu 4.3 açın ve boru tutucusunu 4.4 ılık su tankına takın. Boru filtresinin 4.4 tankın tabanına az değmemesi gerekir (şekil 12).

Cihaz kullanıma hazırdır. Kesintisiz çalışma süresi en fazla 5 dakika olabilir.

! İlk kullanımda konteynere ılık su doldurun, rejim anahtarını «●●» konumuna getirin. Tüm boşlukların su ile dolması gerekir. Konteynerdeki su tamamen bittiğinde cihaz ilk kullanıma hazır olacaktır.

⚠ Konteynerdeki su sıcaklığının 40 °C'den yüksek olmadığından emin olun. Ağız içi mukozası çok duyarlı olduğundan ve sıcak çözeltiden zarar görebileceğinden sıcak sıvılar kullanmayın.

Kullanım

Lavoboya eğilin. Başlık ucunu dişlere veya diş etlerine yanaştırın. Suyun lavaboya akması için ağız hafifçe açık tutun. Başlığı alt çenenin arka dişlerine dik olarak yönlendirin. Rejim anahtarını 1.3 «●●» konumuna (orta basınç) veya «●●●» konumuna (yüksek basınç) getirip cihazı çalıştırın. Su jetini diş etlerinde bekleterek, yavaş hareketlerle dişler arasındaki boşlukları 4-5 saniye temizleyin. Daha sonra su jeti ile diş köklerine yakın bir yerde diş etlerinin hizasından geçerek dişler arasında bulunan bir sonraki boşluğa geçin. Birinci boşlukta yaptığınız hareketi tekrarlayın (şekil 16, kesikli ok su jetinin ulaşacağı yeri, aralıksız ok ise başlığın hareket yönünü göstermektedir).

! İstedığınız zamanda rejim anahtarını «○» "Kapalı" konumuna getirip suyu kesebilirsiniz. Su jetini açılı olarak diş eti cebine yönlendirmeyin, diş çizgisine dik olarak tutmaya çalışın.

Aynı işlemi alt diş sırasının iç ve dış tarafından sırasıyla tüm dişler arasındaki boşluklarda tekrarlayın. Daha sonra, aynı hareketi üst diş sırasının iç ve dış tarafından uygulayın (şekil 17).

Ağız içinde suni ortopedik yapılar olduğunda bunların diş eti, diş ve diğer diş aparatlarıyla temas yerlerinin su jetiyle daha iyi yıkanması gerekir. Bu yapıların yıkama kanallarının özelliklerini diş hekiminizden öğrenin.

⚠ Kesintisiz çalışma 10 dakika devam ettikten sonra cihaz otomatikman kapanır ve yeşil endikatör yanıp sönmeye başlar. İş mekanizmalara soğuma olanağı bırakmak için cihazı en az 10 dakika kullanmayınız.

! Kullanımdan sonra konteyneri komple sudan boşaltın. Böylece bakterilerin çoğalması engellenmiş olur.

Rejim anahtarını 1.3 «○» konumuna getirip cihazı kapatın, başlık, konteyner ve boruyu çıkartın. Tüm parçaları akan ılık suyla durulayıp kuru bezle kurutun. Depolama ve nakliyei kolaylaştırmak için parçaları cihaz takımında yer alan konteynere yerleştirin ve konteyneri ana üniteye bağlayın (şekil 13).

AKÜ KULLANIMI

Açıklama: cihazda uzun süreli kullanıma uygun şarjlı akü (AB) mevcuttur.

Akünün kullanım süresi: doğru şekilde kullanıldığında 3 yıl.

Öneriler: aküde ful dolu şarjda çalışma süresini azaltan kayıt etkisini yaratmamak için kullanım esnasında aküyü komple kullanın. Uzun vadeli depolamada akü şarjının % 70-80 düzeyinde tutulması önerilir.

Akü bakımı: gerekmiyor

Akün değişimi: gerektiğinde akü uzman tamir merkezlerinde değiştirilir.

Aküye ulaşmak için rejim anahtarı çıkartılır, konektör bağlantıları ayrılır, ana ünitenin alt bölümündeki (tapaların altında) 3 civata çözülür ve iç bölüm öne çekilir.

Akü markası ve modeli: GP 130AAHV2B6

GARANTİ TAAHHÜTLERİ

Bu cihaz için belirlenen satış tarihinde başlayan garanti süresi 24 aydır. Garanti taahhütleri ile ilgili, cihaz alıcıya satıldığında kendisine garanti kartı verilir. Garanti kapsamında bakım yapan şirketlerin adresleri garanti kartında belirtilmiştir.

BAKIM, DEPOLAMA, TAMİR VE ELDEN ÇIKARILMA

1. Her kullanımdan sonra cihazın temizlenmesi önerilir.

2. Temizlik işleri başlamadan önce enerji kaynağının kablo bağlantısı kesilir. Cihazı devamlı ıslak bezle temizleyin. Konteyner, boru ve başlıklar bulaşık yıkama makinasında yıkanabilir. Temizlik işlerinde sert bez, fırça ve aşındırıcı maddeler kullanmayın.

3. Yalnızca yumuşak temizlik malzemeleri kullanın. Tiner, benzin veya alkol, cihazın çalışmasını bozduğu ve parçalara zarar verdiği için asla kullanılmamalıdır.

4. Cihazı güneş ışınlarının direk etkisinden ve çarpmalardan koruyun.

5. Cihazı ısıtma aletleri ve açık ateşin yanında kullanmayın ve depolamayın.

6. Cihazı kirlenmeye karşı koruyun.

7. Cihazı agresif çözeltilerle temastan koruyunuz.

8. Gerektiğinde tamir işlerini uzman kuruluşlara yaptırın.

9. Üretici tarafından cihaz için belirlenen, üretim tarihinden itibaren başlayan kullanım süresi 7 yıldır. Ürünün bu kullanım kılavuzuna ve uygulanan teknik standartlara uygun olarak çalıştırılması şarttır. Üretim ayı ve yılı LOT numarasında belirtilmiştir (ilk 2 rakam – ay, ikinci 2 rakam – yıl).

Başlıkların kullanım süresi 1000 çalışma döngüsüne eşittir.

Belirlenen kullanım süresi boyunca teknik durumunu kontrol etmek için cihazı periyodik olarak uzmanlara (uzman tamir kuruluşlarına) göstermek gerekir. İhtiyaç olduğunda, bölgede geçerli olan elden çıkarma kurallarına uygun olarak ürün elden çıkarılacaktır.

10. Cihaza nikel metal hidrit piller takılmıştır. Ülkenizde varsa, lütfen pillerin elden çıkarma işleminin ilgili resmi kuruluş tarafından yapılmasını sağlayın.

⚠ Üreticinin izni olmadan cihaz yapısını değiştirmeyiniz. Cihazın bakımı yalnız ruhsatlı servis merkezleri veya üretici tarafından yapılacaktır.

Aşağıdaki bakım ve tamir işlemleri üretici veya ruhsatlı servis merkezleri tarafından yapılabilir:

Tamir ve bakım işlemleri	Kimin tarafından yapılmaktadır
Boru değiştirilmesi	Kullanıcı
Parça değiştirilmesi	Kullanıcı
Şarj cihazı veya elektrik kablosu değiştirilmesi	Kullanıcı
Günlük temizlik ve dezenfeksiyon	Kullanıcı
Cihazın açılmasını gerektiren parça değiştirme işlemleri.	Ruhsatlı servis merkezi veya resmi temsilci

TEKNIK ÖZELLİKLER

LOT parti numarası	 LDA3
Model	LD-A3
Tüketilen enerji	6 Wt
Akü kapasitesi	2x1250 mA/saat
Akü kullanım süresi	yaklaşık 3 yıl*
Su basıncı:	
basınç regülatörü «●» (orta)	yaklaşık 390 kPa (3 kg-f/cm2)
konumdayken	
basınç regülatörü«●●» (yüksek)	yaklaşık 590 kPa (5 kg-f/cm2)
konumdayken	
Basınç ayarlaması	2 konum (orta, yüksek)
Su jetinin dalgalanma frekansı	1500 darbe/dakika
Maksimum kesintisiz kullanım süresi	5 dakika
Cihazın soğuma süresi	en az 5 dakika
Tank hacminin komple harcanma süresi	yaklaşık 40 saniye
Takım	ana ünite, konektör, konteyner, AQUAJET LD- SA01 başlığı (2 ad.), tutuculu uzun boru, kısa boru, LD-N064 elektrik kaynağı, elektrik kaynağının kablosu, kullanım kılavuzu, garanti kartı, özel karton ambalaj
Konteyner hacmi, en az	160 ml
Cihazın kullanım şartları:	
çevre sıcaklığı,	+10°C - +35°C
nem,	en fazla 80% Rh
atmosfer basıncı	86 - 106 kPa
Cihazın depolama ve nakliye şartları:	
çevre sıcaklığı,	- 10°C - + 40°C
nem,	% 95 Rh
atmosfer basıncı	50 - 106 kPa
Gürültü seviyesi	en fazla 65 dB
İrigratörün koruma seviyesi	IPX5
LD-N064 elektrik kaynağı (takıma dahildir)	
Çıkış basıncı	5 V
Maksimum yük akımı	500 mA
Nominal voltaj	100-240 V/50 Hz
Dış ebatlar	54,5 (yükseklik) x 50 (genişlik) x 220,5 (derinlik) mm.
Ağırlık (ambalajsız)	350 g

* Akünün (şarjın) kullanım süresi cihazın çalışma ve depolama şartlarına bağlıdır.

Cihaz aşırı düşük veya yüksek sıcaklıkta nakledildiğinde onu en az 2 saat oda sıcaklığında bekletmek gerekir.

İşbu Kullanım kılavuzunun baskı tarihi son sayfada EXXX/YYMM/NN formatında belirtildi. YY – yıl, MM – ay, NN – baskı numarası.

Sembollerin açıklımı:

CE 0123 93/42/EEC Yönetmeliğine uygunluk

IPX5 Koruma sınıfı: IP



Önemli: kılavuzu okuyun



Donatım tipi: B



Elektrik akım zararından korunma sınıfı: II



Ürünü elden çıkarırken şu anda bölgenizde geçerli olan kuralları dikkate alın.



Gövdede yer alan LOT numarasının açılımı şu şekildedir: MMYXXXX. MM - üretim ayı, YY - üretim yılı, XXXX - cihaz modelinin numarası

İndikatör sinyallerinin açıklaması

İndikatör rengi	Anlamı
Yeşil	Akü ful doludur. Cihaz çalışıyor.
Yanıp sönen yeşil lamba	AÖtomatik kapanma. Cihazın 10 dakika soğuması gerekir.
Sarı	Akü şarjı düşüktür.
Mavi	Akü şarj edilmektedir.

TIPIK ARIZALAR

Sorun	Neden	Giderme yöntemi
Cihaz çalışmıyor	▶ Akünün şarjı bitti	▶ Aküyü şarj edin
	▶ Konteynerde su yok	▶ Konteyner su doldurun
Kompresör çalışıyor, ama su gelmiyor	▶ Boru ucu su seviyesinin üstündedir	▶ Boru ucunun suya girmesi için su ekleyin
	▶ Cihazın meyili gereğinden fazladır, kısa boru su seviyesinin üstündedir	▶ Cihazı gereğinden fazla eğmeyin
Su basıncı çok düşük	▶ Kısa/uzun borunun filtresi tıkanı	▶ Filtreyi akan su altında yıkayın
	▶ Uzun boru büküldü	▶ Uzun boruyu düzeltin

Yukarıda yazılan önerilere rağmen cihazı çalıştıramadığınız takdirde, çalıştırmayı bırakıp teknik bakım yapan kuruluşa başvurun (yetkili kuruluşların adres ve telefon bilgileri garanti kartında belirtilmiştir). İrigratörü tamir etmeyi denemeyin.

Ürün ISO 13485 uluslararası standardına uygun olarak üretilmektedir. Cihaz MDD 93/42/EEC Avrupa Yönetmeliğine, IEC 601-1-88, IEC 60601-1-2 Şartnamelerine uygundur.

Ürün, aşağıda belirtilen şirketin kontrolünde ve bu şirket için üretilmektedir: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591)

Üretici: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China)

Avrupa Birliği Temsilcisi: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Polonya, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-posta: biuro@littledoctor.pl)

Detaylı bilgiler: <http://aquajet.sg>

TUR

GARANTİ KARTI

LD-A3

MODEL

SATIŞ TARİHİ

LOT PARTI NUMARASI

ALICI ADI

Ticaret kuruluşun kaşesi (damgası)

Satıcı imzası

Yetkili bakım kuruluşunun temsilcisi tarafından doldurulur

Tarih	Garanti bakımının yapıldığına dair kayıtlar

CE 0123

IPX5



© Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Singapore).
© Copyright Little Doctor International (S) Pte Ltd., 2021.