

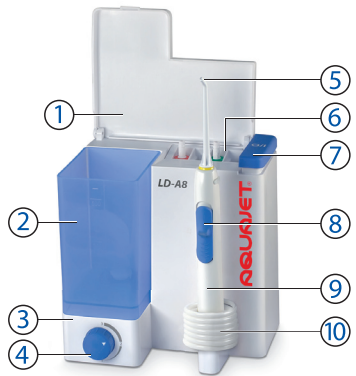
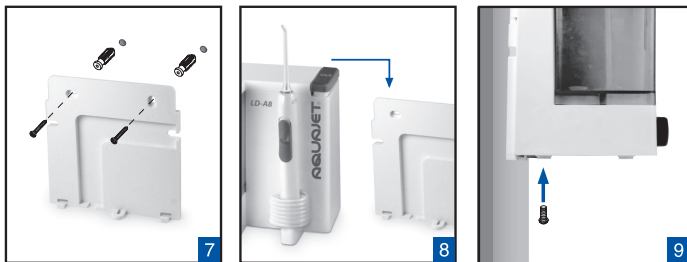


LTU Burnos ertmės irigatorius AQUAJET LD-A8 Naudojimo instrukcija

PAGRINDINĖS DALYS

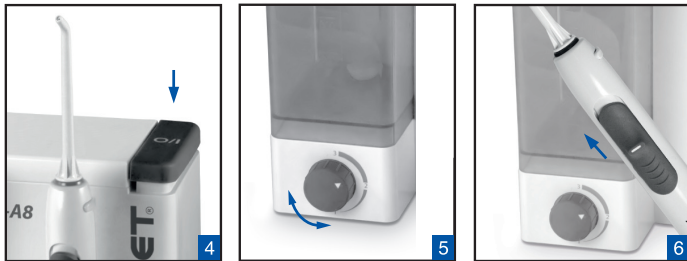

1. Dangtis
2. Indas vandeniui
3. Prietaiso korpusas
4. Srovės slėgio reguliatorius
5. Antgalis
6. Skyrius antgaliams laikyti
7. Įjungimo/išjungimo mygtukas
8. Vandens tiekimo jungiklis
9. Irgatoriaus rankenėlė
10. Vamzdelis

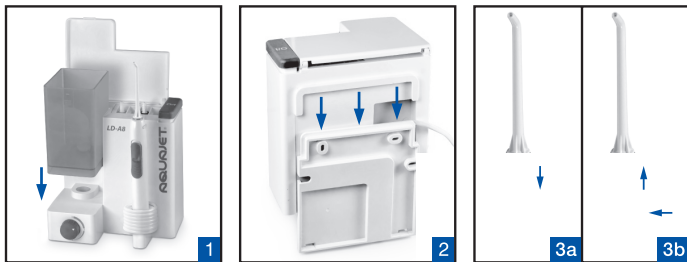

PASKIRTIS

Burnos ertmės irigatorius AQUAJET LD-A8 su priedais (toliau tekste - irigatorius, prietaisas, produktas) skirtas periodonto ligų, gingivito, parodontito terapijai ir profilaktikai, burnos ertmės gleivinės medikamentiniam drėkinimui ir masažui, taip pat dantų aparatų (tame tarpe, vainikėlių, implantų, dantų protezų, sąkandžio korekcijos aparatų) ir tarpdančių priežiūrai.

Naudojant prietaisą galingas pulsuojantis vandens ar specialaus tirpalo srautas pasiekia visas burnos ertmės sritis. Masažuoja danteną ir visą burnos ertmę, gerina kraujotaką ir apsaugo nuo dantenų kraujavimo.

Prietaiso pagalba užtikrinama maksimali dantų protezų ir vainikėlių priežiūra, apsauga nuo ligų sukeliančios mikrofloros ir uždegimo dantų protezų ir vainikėlių kontakto su burnos ertmės gleivine vietoje, ko neįmanoma pasiekti naudojant įprastas priemones.

Apsaugo nuo dantų akmenų susidarymo, gingivito ir daugelio kitų periodonto ligų.

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

Burnos gleivinė yra sudėtingas žmogaus organizmo organas, kuris atlieka daug gyvybiškai svarbių funkcijų. Burnos ertmės kraujotakos cirkuliacijos pažeidimas, atsirandantis dėl įvairių odontologinių korekcijų, nepakankamos burnos priežiūros, įvairių ligų, smarkiai pablogina žmogaus gyvenimo kokybę. Reguliarus masažuojantis pulsuojantis vandens srovės poveikis burnos ertmės minkštiesiems audiniams atkuria normalią kraujotaką ir prisideda prie ligų prevencijos ir gydymo. Sveika burnos ertmės kraujotaka užtikrina natūralias burnos gleivinės apsaugines savybes, kad būtų atkurtos apsauginės, sekrecijos, jutimo, termoreguliacinės ir imuninės funkcijos.

Kai kalbama apie dantų priežiūrą, dauguma žmonių linkę sutelkti dėmesį į dantų baltumą ir neskiria dėmesio sveikai dantenų būklei. Tačiau, jei Jūs nemasažuosite ir nevalysite tarpdančių ir dantenų vagelių (srities tarp danties kaklelio ir dantenos), pamažu susidarys dantų akmenys, kaip pasekmė - dantenų uždegimas ir nuolatinis nemalonus burnos kvapas. Vystantis uždegiminiam procesui dantenų audinys pamažu atsiskiria nuo danties, bakterijos prasiskverbia giliai iki pat žandikaulio, uždegimas pažeidžia dantenų struktūrą. Dėl kaulinio audinio išnykimo dantenos taip pat išnyksta, dantys atrodo pailgėję ir šypsena atrodo jau ne taip estetiškai. Dantenų ir žandikaulio kaulų, kaip dantų atramos, silpnėjimas sukelia dantų praradimą.

Tarpdančiai – tai bakterijų kaupimosi ir dauginimosi vieta. Bakterijos gyvena minkštuose apnašuose, dėl jų gyvybinės veiklos susidaro rūgštis, kuri pažeidžia danties emalį ir sukelia dantenų gleivinės uždegimą.

Vainikėlius ir dantų protezus yra sunku tinkamai išvalyti, todėl patogeninės bakterijos kaupiasi tarp vainikėlio kraštų ir dantenų vagelių. Tai sukelia dantų akmenų susidarymą ir burnos ertmės gleivinės uždegimą.

Naudojant irigatorių vaikams sumažėja odontologinių ligų rizika, lengviau prižiūrėti burnos ertmę, o vaikams, kuriems dantys tiesinami breketu pagalba, burnos ertmės higienos laikas sumažėja kelis kartus. Vaikams dažnai trūksta kantrybės ir atkaklumo kruopščiai išvalyti dantis, o irigatorius leidžia geriausiai atlikti burnos ertmės higieną.

Kontraindikacijos:

- Prieš pradėdami iriguoti burnos ertmę, gydytojas turi apžiūrėti pacientus, kuriems dantų gydymo metu anksčiau reikėjo premedikacijos antibiotikais (bakteremijos)
- Kontraindikuotinas pacientams, kuriems yra periodonto abscesai ir opiniai procesai burnos ertmėje.

KAIP VAIKAI GALI NAUDOTI AQUAJET LD-A8

DĖMESIO! Burnos ertmės irigatorius AQUAJET LD-A8 yra elektrinis prietaisas! Vaikas gali naudoti prietaisą tik prižiūrint suaugusiam, kuris išsamiai susipažino su šia Naudojimo instrukcija.

Naudojant burnos ertmės irigatorių AQUAJET LD-A8 vaikams sumažėja odontologinių ligų rizika, lengviau prižiūrėti burnos ertmę, o vaikams, kuriems dantys tiesinami breketu pagalba, burnos ertmės higienos laikas sumažėja kelis kartus. Taip pat vaikams dažnai trūksta kantrybės ir atkaklumo kruopščiai išvalyti dantis, o irigatorius leidžia geriausiai atlikti burnos ertmės higieną.

Vaikai gali naudoti burnos ertmės irigatorių nuo tada, kai savarankiškai pradeda valyti dantis dantų šepetėliu.

Nors tinkamai naudojant burnos ertmės irigatorių burnos ertmės pažeisti neįmanoma, prieš pirmą kartą naudojant irigatorių būtina pasikonsultuoti su vaikų odontologu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Naudodami elektros prietaisus, ypač, jei šalia yra vaikų, visada laikykitės žemiau nurodytų bendrų saugos priemonių.

- Po naudojimo visada išjunkite prietaisą.
- Jei ilgai nenaudojate prietaiso, atjunkite jį nuo elektros tinklo, ištraukite elektros laido kištuką iš lizdo.
- Nelieskite elektros maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.
- Nemirkykite prietaiso vandenyje, nedėkite į vandens nuotėkio vietas ar į dušo kabiną.
- Nenaudokite maudymosi metu.
- Nelieskite prietaiso, jei jis nukrito į vandenį. Nedelsiant išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Prieš naudojimą įsitikinkite, kad elektros maitinimo laidas nėra pažeistas. Draudžiama naudoti prietaisą, jei elektros maitinimo laidas yra pažeistas.
- Elektros maitinimo laidas neturi liestis su karštais arba šildomais paviršiais.
- Jei prietaisas neveikia, nebandykite remontuoti jo patys. Kreipkitės į specializuotą servisą.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Naudokite tik šiam prietaisui skirtus priedus, nurodytus šioje naudojimo instrukcijoje. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų.
- Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų.
- Nenaudokite prietaiso patalpose, kur purškiami aerosoliai.

- Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.
- Būtina atidžiai prižiūrėti, jei prietaisą naudoja vaikai, arba jis naudojamas vaikams ar šalia jų.
- Nekeiskite šio prietaiso konstrukcijos be gamintojo leidimo.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus turi atlikti tik įgaliotas techninės priežiūros centras arba platintojas.
- Nekeiskite prietaiso viduje esančių detalių, kol techninės priežiūros neatliks įgaliotasis atstovas ar gamintojas.
- Saugiklis yra prietaiso viduje; jei jis sugedo, pakeiskite jį įgaliotame serviso centre.
- Maitinimo laidą gali pakeisti tik profesionalus techninės priežiūros personalas arba gamintojas.

NAUDOJIMO TVARKA

Kaip užpildyti indą.
Naudodami alkoholio turinčius skysčius, suspensijos tipo skysčius, aliejinius skysčius, taip pat kitus, irigatoriaus naudojimui neskirtus skysčius Jūs galite sugadinti irigatorių!

Atidarykite dangtį ir išimkite vandens indą. Įpilkite į jį šilto vandens arba specialaus tirpalo.

Pirmą kartą naudodami įpilkite į indą šilto vandens, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, nustatykite vandens srovės slėgio reguliatorių ties „0“ padėtimi ir pastumkite vandens tiekimo jungiklį aukštyn. Po to keletą kartų sklandžiai perjunkite reguliatorių ties padėtimi „4“ ir atgal, kad vanduo užpildytų visas vidines ertmes. Aparatas bus paruoštas naudoti pirmą kartą, kai inde bus sunaudotas visas vanduo.

Įsitikinkite, kad skysčio temperatūra inde neviršija 40°C. Nepilkite karštų tirpalų ar vandens į indą, nes burnos gleivinė yra labai jautri ir karštas tirpalas galite ją pažeisti. Įstatykite indą į vietą (1 pav.).

KAIP PAJUNGTI ELEKTROS MAITINIMĄ

Maitinimo laidas sudedamas į specialų skyrių galinėje prietaiso sienelėje (2 pav.). Nustumkite galinį dangtį žemyn ir ištraukite maitinimo laidą.

Uždėkite galinį dangtį į pradinę padėtį, naudodami specialią angą, skirtą elektros maitinimo laidui nutiesti. Įjunkite elektros maitinimo laidą į elektros maitinimo lizdą.

PRITVIRTINKITE/NUIMKITE ANTGALIUS PRIE IRIGATORIAUS RANKENĖLĖS

Prietaiso komplekte yra 4 kieti ir 1 minkštas individualūs antgaliai su skirtingų spalvų apvadais. Pasirinkite kiekvienam šeimos nariui individualų konkrečios spalvos antgalį. Naudokite tik asmeninį pasirinktos spalvos antgalį. Taip Jūs visada laikysitės asmeninės higienos reikalavimų.

Įdėkite antgalį į irigatoriaus rankenėlę iki spragtelėjimo, kad antgalio kryptis sutaptų su grioveliu irigatoriaus rankenėlėje (3a pav.). Prietaisas paruoštas naudoti.

Norėdami nuimti antgalį, paspauskite antgalio nuėmimo mygtuką ir patraukite už antgalio įraižų srityje (3b pav.).

Rekomendacijos, kaip saugiai nuimti antgalį:

1. Jei antgalį sunku nuimti nuo irigatoriaus rankenėlės arba jis slysta rankoje dėl vandens, naudokite sausą audinį. Įvyniokite antgalį į minkštą sausą audinį ir pabandykite nuimti iš naujo.
2. Nuimdami antgalį nuo irigatoriaus rankenėlės, traukite jo NESUKDAMI apie ašį. Sukdami antgalį galite jį sugadinti.

Papildomus antgalius galite įsigyti atskirai. Šiam prietaisui pirkite tik AQUAJET LD-SA01, LD-SA02 antgalius ir antgalius LD-SA05 irigatoriui AQUAJET LD-A8.

KAIP ĮJUNGTI PRIETAISĄ

Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (4 pav.).

SROVĖS SLĖGIO REGULIAVIMAS

Vandens srovės slėgį galima nepertraukiamai ir sklandžiai reguliuoti sukant reguliatorių priekiniame prietaiso skydelyje (5 pav.). Iš pradžių rekomenduojama nustatyti žemiausią srautą (1 srauto reguliavimo padėtis), ypač jei Jūsų dantenos gali kraujuoti arba jei irigatoriumi naudojasi vaikas. Pasirinkite Jums patogiausią srovės slėgį palaipsniui didindami srovę. Pasitarkite su savo odontologu, koks srovės slėgis yra jums tinkamiausias, ypač jei sergate burnos ligomis.

NAUDOJIMAS

Pasilenkite virš praustuvo. Priartinkite antgalį prie dantų arba dantenų. Paleiskite srovę vandens paleidimo jungikliu irigatoriaus rankenėlėje (6 pav.) pastumdami jį į viršų. Laikykite burną truputi praziotą, kad vanduo bėgtų į praustuvą. Jūs bet kuriuo metu galite sustabdyti vandens srovę pastūmę vandens paleidimo jungiklį rankenėlėje žemyn.

Nukreipkite antgalio galiuką palei dantenų liniją prie dantų pagrindo, taip pat į tarpdančius. Vandens srovė efektyviai ir švelniai masažuoja dantenas ir visą burnos ertmę, drėkina dantis, valo dantenas ir tarpdančius nuo maisto likučių, dantis - nuo dantų apnašų.

Po naudojimo visada ištuštinkite indą. Taip išvengsite bakterijų dauginimosi likusia-me vandenyje ar tirpale. Neišjunkite prietaiso, kol visas vanduo neišbėgs iš indo.

Ilgiausias nepertraukiamo prietaiso naudojimo laikas - 10 minučių. Ne-naudokite prietaiso, jei indas yra tuščias.

Išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku, nuimkite antgalį ir padėkite jį į skyrių priedų laikymui. Nušluostykite sausa šluoste irigatoriaus rankenėlę ir padėkite ant prietaiso laikiklio.

AQUAJET naudojimas burnos higienai negali visiškai pakeisti dantų šepetėlio. Naudokite AQUAJET po valgio, kad išplautumėte maisto likučius ir padarytumėte gilų dantenų masažą, po jo naudokite dantų šepetėlį ir tarpdančių siūlą.

Remiantis parodontozės tyrimais, ankstyvas akmenų susidarymo stadijas žmonės dažnai ignoruoja, nes nėra aiškių ligos požymių. Paprastai ligai leidžiama progresuoti iki rimtesnių stadijų. Dantenų kraujavimas po AQUAJET naudojimo yra parodontozės simptomas, tačiau ilgesnis AQUAJET naudojimas palengvina šį simptomą ir sugrąžina dantenoms sveikėnę būklę. Pasitarkite su savo odontologu, jei dantenos kraujuoja ilgiau nei dvi savaites.

AQUAJET TVIRTINIMAS PRIE SIENOS

Nuimkite galinį prietaiso dangtelį, pastumdami jį žemyn. Išgręžkite sienoje dvi skylės ir įkalkite į skylės du plastmasinius kaiščius, kurie yra prietaiso komplekte. Prisukite galinį dangtelį prie sienos (7 pav.). Atsargiai, kad nepažeistumėte, per-veskite elektros maitinimo laidą per skylę galiniame dangtelyje. Uždėkite prietaisą ant galinio dangtelio (8 pav.) Ir pritvirtinkite varžtą (9 pav.).

AQUAJET TVIRTINIMAS PRIE SIENOS

Šiam prietaisui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pardavimo dienos. Garantiniai įsipareigojimai įforminami garantiniame talone parduodant prietaisą pirkėjui.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Šiam prietaisui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pardavimo dienos. Garantiniai įsipareigojimai įforminami garantiniame talone parduodant prietaisą pirkėjui

PRIEŽIŪRA, LAIKYMAS, REMONTAS IR ATLIEKŲ TVARKYMAS

1. Reguliariai valykite prietaisą ir visus priedus. Prieš valydami prietaisą, išjunkite elektros maitinimo laidą iš elektros tinklo lizdo. Reguliariai valykite prietaisą drėgna šluoste. Irigatoriaus rankenėlę nušluostykite sausa šluoste. Tirpalų indus ir priedus galima plauti indaplovėje. Priedams laikyti skirtą skyrių galima nuimti ir plauti po tekančiu vandeniu arba indaplovėje. Taip pat periodiškai reikiama valyti erdvę po priedų skyriumi. Prietaisui valyti nenaudokite šiurkštaus audinio šluosčių, šepečių ir abrazyvinių priemonių.
2. Prietaisą būtina valyti bent kartą per savaitę. Jei prietaisą naudoja keli asmenys, būtina išvalyti prietaisą tarp skirtingų asmenų naudojimo seansų.
3. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir smūgių.
4. Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso šalia šildymo prietaisų ir atviros ugnies.
5. Saugokite prietaisą nuo purvo.
6. Saugokite prietaisą nuo kontakto su agresyviais tirpalais.
7. Iškilus poreikiui remontuokite prietaisą tik specializuotuose servisuose.
8. Irigatoriaus tarnavimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos. Antgalių tarnavimo laikas yra 1000 naudojimo ciklų. Pagaminimo mėnuo ir metai nurodyti serijos numeryje po A raidės (pirmi 2 skaičiai – metai, sekantys du skaičiai – mėnuo). Pasibaigus nustatytam tarnavimo laikui reikia periodiškai kreiptis į specialistus (į specializuotus remonto servisus), kad patikrinti prietaisą techninę būklę, ir, jei reikia, utilizuoti jį pagal Jūsų regione galiojančias taisykles. Specialių utilizavimo sąlygų gamintojas nenustatė.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Modelis:	LD-A8
Maitinimas:	~ 230V AC ~50Hz
Energijos sąnaudos:	140 VA
Vandens slėgis mažiausias:	apie 290 kPa
didžiausias:	ne mažiau kaip 810 kPa
Slėgio reguliavimas:	sklandus, nepertraukiamas
Vandens srovės pulsacijos dažnis:	1200 impulsų/min.
Be pertraukos prietaisą ilgiausiai galima naudoti	10 minučių, po to 60 minučių reikia išjungti
Pilno indo sunaudojimo laikas:	maždaug 1,5 minutės.
Komplektas:	pagrindinis blokas (kompresorius), indas, antgaliai AQUAJET LD-SA01 (4 vnt.), antgaliai AQUAJET LD-SA02 (1 vnt.), skydelis prietaisui pritvirtinti prie sienos, varžtų ir kaišių rinkinys prietaisui pritvirtinti prie sienos, naudojimo instrukcija, garantinis talonas, individuali kartono pakuotė.
Indo talpa, ne mažiau:	500 ml.
Prietaiso naudojimo sąlygos: aplinkos oro temperatūra:	nuo + 10°C iki + 35°C
drėgnumas:	ne daugiau kaip 80% Rh
atmosferos slėgis:	nuo 86 iki 106 kPa
Prietaiso laikymo ir gabenimo sąlygos: aplinkos oro temperatūra:	nuo + 10°C iki + 40°C
drėgnumas:	ne daugiau kaip 80% Rh
atmosferos slėgis:	nuo 50 iki 106 kPa
Gabaritiniai matmenys:	180 (a) x 165 (p) x 140 (g) mm.
Svoris (be pakuotės):	1470 g.
Pagaminimo metai ir mėnuo	Yra nurodyti ant įrenginio korpuso serijos numerio, kaip „AYYMMMA8XXXX“, kur YY yra pagaminimo metai, o MM yra pagaminimo mėnuo.

Simbolių reikšmė:

CE 0123	Atitinka Direktyvą 93/42/EEC
IP 21	IP apsaugos klasė
	BF tipo prietaisas
	II apsaugos klasė
	Svarbu: Perskaitykite instrukciją
	Gamintojas
	Utilizuokite prietaisą pagal Jūsų regione šiuo metu galiojančias taisykles.

Šios Naudojimo instrukcijos redakcijos data nurodyta paskutiniame puslapyje, kaip EXXX/YYMM/NN, kur YY – metai, MM – mėnuo, o NN – redakcijos numeris.

TIPINIAI GEDIMAI

Problema	Priežastis	Pašalinimo būdas
Prietaisas neveikia	Elektros tinklo lizde nėra elektros	Pabandykite įjungti į kitus elektros tinklo lizdus
	Blogas elektros laido kištuko kontaktas su elektros lizdu	Ištraukite elektros laido kištuką iš lizdo ir vėl įjunkite
Kompresorius veikia, bet vanduo neteka	Inde nėra vandens	Įpilkite į indą vandens
	Vandens tiekimo jungiklis nustatytas apatinėje padėtyje	Pastumkite vandens tiekimo jungiklį aukštyn
Labai mažas vandens slėgis	Neteisingai nustatytas srovės slėgio reguliatorius	Sureguliuokite slėgį srovės slėgio reguliatoriumi
	Netinkamai įstatytas tirpalo indas	Teisingai įstatykite tirpalo indą
Vandens indas praleidžia vandenį	Nesandarus indo guminis vožtuvas	Nuplaukite vožtuvą po tekančiu šiltu vandeniu su plovimo priemone

INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMĄ IR REGISTRACIJĄ.

Prietaisų gamyba atitinka tarptautinį standartą ISO 13485. Prietaisas atitinka Europos direktyvą MDD 93/42/EEC.

Oficialus atstovas ES: Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland. Tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, faksas: +48 12 2684753, biuro@littledoctor.pl

Pagaminta kontroliuojant ir skirta Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 19959.

Pašto adresas: Yishun Central, P.O. Box 9293, Singapore 917699. Faksas: +65 62342197, el. paštas: info@littledoctor.sg

Gamintojas: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No. 8 Tongxing Road Economic and Technical Development Area Nantong Jiangsu P. R. Kinija

EC-REP: Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street Krakow 30-390, Lenkija.

PAPILDOMI IRIGATORIAUS PRIEDAI*



Antgalis AQUAJET LD-SA01

- Skirtas naudoti su irigatoriais AQUAJET LD-A3, LD-A8
- Pagamintas iš plastiko
- Individualiam naudojimui
- Kiekis pakuotėje – 2 vnt.



Antgalis AQUAJET LD-SA02

- Antgalis su šepetėliu
- Skirtas naudoti su irigatoriais AQUAJET LD-A3, LD-A8
- Pagamintas iš plastiko
- Individualiam naudojimui
- Kiekis pakuotėje – 2 vnt.



Antgalis AQUAJET LD-SA02

- Specialus sublingvalinis antgalis su lanksčiu antgaliu sunkiai pasiekiamų vietų valymui ir higienai
- Skirtas naudoti su irigatoriais AQUAJET LD-A3, LD-A8
- Pagamintas iš plastiko su lanksčiu purškikliu
- Individualiam naudojimui
- Kiekis pakuotėje – 2 vnt.

* Parduodami atskirai.

CE 0123



IPX5



® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Singapore).

© Copyright Little Doctor International (S) Pte Ltd., 2019.