

LD12

Little Doctor®

Asinsspiediena mērītājs LD

Lietošanas instrukcija

L7




SATURS

Detāļas un sastāvdaļas	3
Vispārīgā informācija	4
Ieteikumi pareizām mērījumiem	5
Bateriju ievietošana	6
Datuma un laika uzstādījumi	6
Pareizā pozīcija mērījumu laikā	7
Manšetes sagatavošana	8
Mērījumu procedūra	8
Atmiņas funkcija	9
Informācija par kļūdām	10
Apkope, uzglabāšana, remonts un utilizācija	10
Traucējumu novēršanas padomi	11
Garantija	12
Tehniskie dati	12
Sertifikācija un reģistrācija	13

DETAĻAS UN SASTĀVDAĻAS

LV

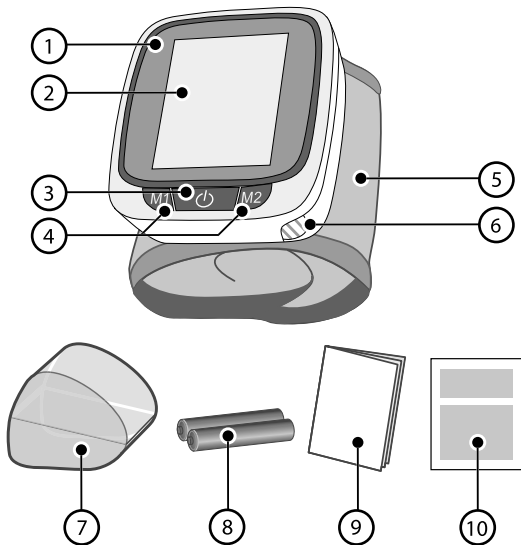

1. Galvenā ierīce.
2. LCD.
3. Poga  (ieslēgt/Izslēgt)
4. «M1» и «M2» atmiņas pogas.
5. Manšete.
6. Bateriju vāks.
7. Iebāšanas futlāris.
8. Baterijas.
9. Lietošanas instrukcija.
10. Garantijas talons.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Šī lietošanas instrukcija ir izstrādāta, lai palīdzētu lietotājam droši un efektīvi darboties ar automātisko digitālo ierīci LD (modifikācijām LD12) (turpmāk - «Ierīce»), lai izmērītu asinsspiedienu un sirdsdarbības frekvenci. Izmantojiet šo ierīci ievērojot noteikumus, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Darbiniet ierīci tikai kā paredzēts. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem. Lasīt un saprasties visas instrukcijas, īpaši ieteikumus par pareizo mērīšanu.

LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

Izmantojiet šo ierīci, lai noteikt Jūsu sistolisko un diastolisko asinsspiedienu un sirdsdarbības frekvenci pacientiem vecumā no 15 gadiem. Šī ierīce ir ieteicama lietošanai cilvēkiem ar nestabilu asinsspiedienu vai zināmu arteriālo hipertensiju mājās, kā papildus medicīnisko uzraudzību.

DARBĪBAS PRINCIPS

Šī ierīce izmanto oscilometrisko mērīšanas metodi ar Fuzzy algoritmu asinsspiediena un pulsa mērīšanai. Aptiniet manšeti ap augšdelmu un tā sāks automātiski piepūsties. Ierīces jutīgie elementi jūt vājo spiediena oscilāciju manšetē, paplašina to, balstoties uz pleca artērijas kontrakcijām, atbildot uz katru sirdspukstu. Pumpēšana tiek pārtraukta kad manšete ir pietiekoši uzpūpēta, lai noteikt diastolisko un sistolisko spiedienu (mēra spiediena viļņu amplitūdu, pārverš Hg staba milim etros un parāda uz displeja skaitļos), pēc tam gaiss tiek izvadīts no manšetes. Atcerieties, ka ierīce neuzrādīs minēto mērījuma precizitāti, ja tā tiek izmantota vai uzglabāta atšķirīgā no lietošanas instrukcijā minētās temperatūras vai mitruma. Mēs brīdinām par iespējamām kļūdām asinsspiediena mērījumos ar šo ierīci cilvēkiem ar izteikto sirds aritmiju. Konsultējaties ar ārstu par asinsspiediena mērīšanu Jūsu bērnam.

JAUNO LD TEHNOLOĢIJU APRAKSTS



Fuzzy algoritms – algoritms mērījumu vērtību apstrādei, attiecībā uz cilvēka sirds īpašībām, tādējādi nodrošinot augstu mērījuma precizitāti



WHO skala – mērījuma rezultāta klasifikācija, atbilstoši PVO rekomendācijām.




Aritmijas indikators – īpaša zīme “❤️” uz ierīces displeja, lai atklātu neregulāro sirdsdarbību.

ĪTEIKUMI PAREIZĀM MĒRĪJUMAM

1. Pareizai mērīšanai, Jums vajag zināt, ka asinsspiediens VAR KRASI SVĀRSTĪTIES pat īsā laika intervālos. Asinsspiediens ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Parasti tas ir zemāk vasarā un augstāk ziemā. Asinsspiediens mainās kopā ar atmosfēras spiedienu, ir atkarīgs no fiziskās slodzes, emocionāla satraukuma, stresa un uztura režīma. Zāles, alkohols un smēķēšana izraisa nozīmīgu efektu. Pat asinsspiediena mērīšana poliklīnikā uzrāda augstāko asinsspiedienu daudziem cilvēkiem, līdz ar to asinsspiediena mērījums mājās bieži atšķiras no cipariem, kas saņemti poliklīnikā. Tā kā asinsspiedienam, ir tendence uzkāpt pie zemām temperatūrām, mērījumus jāveic iekštelpu temperatūrā (aptuveni 20° C). Ja ierīce palika uz ilgu laiku vietā, kur ir zema temperatūra, pirms mērīšanas, nolieciet to vismaz uz 1 stundu iekštelpu temperatūrā, pretējā gadījumā mērījuma rezultāti var būt neprecīzi. Dienas laikā mērījumu rezultātu starpība veselam cilvēkam var būt līdz 30-50 mmHg sistoliskām spiedienam un līdz 10 mmHg diastoliskām spiedienam. Asins spiediena atkarība no dažādiem faktoriem individuālā katrai personai. Līdz ar to ir ieteicams saglabāt īpašu grāmatu ar asins spiediena rādītājiem. TIKAI CERTIFICĒTS ĀRSTS, izmantojot JŪSU PIERAKSTUS spēj analizēt asinsspiediena izmaiņu tendences.

2. Pie sirds-asinsvadu un dažām citām slimībām, kas prasa asinsspiediena monitoringu, to jāveic noteiktajās stundās, ko Jums ir noteicis ārsts. ATCERIETIES, ka jebkuru diagnostiku un ārstēšanu var veikt tikai sertificēts ārsts, PAMATOJOTIES uz viņa iegūtiem asinsspiediena mērījumiem. Zāļu lietošanu un to devu var noteikt tikai Jūsu ārsts.

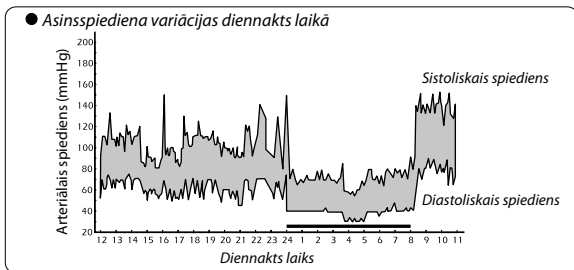

Att. 1


3. Pie šādiem traucējumiem, kā ateroskleroze, vājš pulss, ka arī pacientiem ar ievērojamiem sirds ritma traucējumiem var būt grūti precīzi izmērīt asinsspiedienu. Šādos gadījumos, konsultējaties ar savu ārstu par elektroniskās ierīces piemērošanu.

4. KLUSĒJIET MĒRĪJUMU LAIKĀ, LAI IEGŪTU PRECĪZU ASINSSPIEDIENA REZULTĀTU. MĒRIET JŪSU SPIEDIENU KLUSUMĀ UN KOMFORTABLOS APSTĀKĻOS PIE IEKŠTELPU TEMPERATŪRAS. NEĒDIET STUNDU PIRMS MĒRĪJUMA, NESMĒĶĒJIET, NELIETOJIET TONIZĒJOŠUS LĪDZEKĻUS, ALKOHOLU 1,5-2 STUNDAS PIRMS MĒRĪJUMA.

5. Asinsspiediena mērījumu precizitāte ir atkarīga no tā, vai manšete atbilst rokas izmēram. Manšetei nedrīkst būt pārāk mazai vai pārāk lielai.

6. Uzgaidiet 3 minūtes starp mērījumiem, lai atjaunot asins cirkulāciju. Cilvēkiem ar izteiktu aterosklerozi, ievērojamas asinsvadu elasticitātes zaudējumu dēļ var būt nepieciešams palielināt gaidīšanas laiku starp mērījumiem (10-15 minūtes). Tas attiecas arī uz diabēta pacientiem. Lai iegūtu precīzāku mērījumu, ieteicams veikt virkni no 3 secīgiem mērījumiem un izmantot vidējo vērtību.

7. Apakšdelmas asinsspiediena līmenis var atšķirties no augšdelmas spiediena. Ja mērīt spiedienu veselam cilvēkam, šī starpība varētu būt +/- 10 mm Hg robežās gan sistoliskām, gan diastoliskām spiedienam. Cilvēkiem ar hipertensiju, cukura diabētu, aknu funkciju anomālijām, perifēro asinsplūsmas traucējumiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Šajā gadījumā, apakšdelmas un aukšdelmas spiediena mērīšanas rezultāti var būtiski atšķirties.

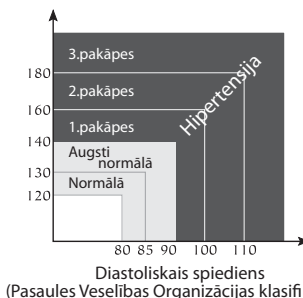


Att.2

BATERIJU IEVIETOŠANA

- 1) Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet 2»AAA« izmēra baterijas atbilstoši polaritātei, atzīmētai nodalījuma iekšpusē. Nepielietojiet daudz spēka, lai noņemt vāciņu no bateriju nodalījuma.
- 2) Aizveriet nodalījuma vāciņu.

Nomainiet visas baterijas kad uz ekrāna parādās indikators " ", vai, kad uz ekrāna nav tādas norādes. Indikators neparāda izlādes līmeni.

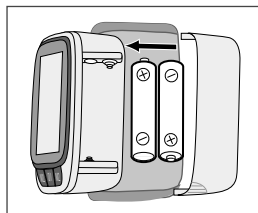

Att.3

DATUMA UN LAIKA UZSTĀDĪJUMI

Lai pārslēgtos uz datuma un laika iestatījumu režimu, ir nepieciešams nospiegt un turēt pogu vairāk nekā 5 sekundes.


Kad datuma un laika iestatījumu režims ir ieslēgts, lai uzstādītu datumu un laiku, ir nepieciešams, turot pogu M1, atspiegt pogu . Parametri mirgos. Palielināt izvēlēto parametru var spiežot pogu M2, uz samazināt - spiežot pogu M1. Pāriet uz iestatījumu nākamo parametru, gads / mēnesis / stundas / min, ir iespējams, spiežot pogu .

Ja vienas minūtes laikā netiek veiktas nekādas darbības, ierīce neatkarīgi pāries uz norādīto datumu un laiku. Šajā gadījumā stāsies visas izmaiņas, kas jau tika veiktas. Lai izslēgt datuma un laika iestatījumu režīmu, ir nepieciešams nospiegt un turēt pogu vairāk  nekā 5 sekundes.

PAREIZĀ POZĪCIJA MĒRĪJUMU LAIKĀ

Pareizā pozīcija mērījumu laikā

1. Apziežaties uz krēsla.
2. Paceliet roku tā, lai plauksta būtu vērsta uz augšu un elkonis atrastos uz galda.
3. Nolieciet futlāri vai salocītu dvieli zem apakšdelma un pārliecinieties, ka manšete ir sirds līmenī.

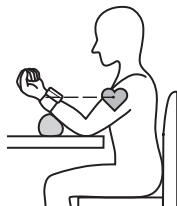

Att.4

Kad galds nav pieejams

1. Apziežaties uz krēsla.
2. Paceliet ierīci līdz sirds līmenim, nedaudz uzspiežot savu kreiso roku uz krūtīm.
3. Mērīšanas laikā nedaudz atpūsties savu kreiso roku uz labo vienu.



Att.5

Asinsspiediena mērīšana, guļot uz muguras

1. Apgulāties uz muguras.
2. Nolieciet futlāri vai salocītu dvieli zem apakšdelma un pārliecinieties, ka manšete ir sirds līmenī.




Att.6

- Veiciet 5-6 dziļas ieelpas un izelpas pirms mērījuma un atpūšaties.
- Mērījumu rezultāti var nedaudz atšķirties atkarībā no jūsu pozas mērījumu laikā. Mērījuma laikā nelieciet kāju pāri otrai.
- Veiciet mērījumus uz tās pašas rokas un tajā pašā pozīcijā.
- Ja turat manšeti attiecīgi zem vai virs sirds līmeņa, mērījumu rezultāti tiks pārvērtēti vai nenovērtēti.

MANŠETES SAGATAVOŠANA


1. Turiet kreiso roku ar plaukstu uz augšu, uzlieciet manšeti uz jūsu rokas, lai monitora displejs saskartos ar plaukstu. Ja Jums neizdodas uzlikt manšeti uz kreiso roku, uzlieciet to uz labo roku. Mērījumu rezultāti uz abām rokām var nedaudz atšķirties.
2. Novietojiet manšeti uz savas rokas tā, lai mala būtu 5-10 mm attālumā no jūsu palmu beigām. Izlīdziniet monitoru uz jūsu rokas.
3. Nostipriniet manšeti uz jūsu rokas, lai nav brīvas vietas starp manšeti un roku. Manšetei ir jābūt ērti pielāgotai. Kamēr rotējat manšeti ap jūsu roku, pārļiecinieties, ka neviens audums neatrodas starp manšeti un roku. Ievietojiet manšetes galu apmēram uz 5 cm metāla gredzenā, kā parādīts bildē.

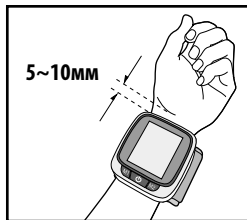


Att.7

MĒRĪJUMU PROCEDŪRA

1. Pirms procedūras dziļi ieelpojiet un izelpojiet 5-6 reizes un atslābināties. Nepārvietojaties, nerunājat un nesastingriet savas rokas.
2. Nospiediet .
3. Visi simboli parādīsies uz ekrāna uz īsu laiku (zīm.8). Ierīce automātiski sāks uzpūst gaisu manšetē. Pirmā uzpūšanās apstāsies pie 190 mmHg (zīm.9.).
4. Sasniedzot līmeni 190 mmHg, manšete pakāpeniski izpūties. Cipari uz ekrāna sāks skaitīt atpakaļ. Pulsa simbols «♥» sāks mirdzināt. Ņemot vērā, ka asinsspiediens un pulss tiek mērīts gaisa izpūšanas laikā, nerunājat, nekustiniet ar rokām un nesastingriet savas rokas.
5. Kad mērījums tiks pabeigts, izskanēs signāls, tad manšete pilnībā izpūties un jūsu mērījumu rezultāti mirgos uz ekrāna un parādīsies indikators, atgādinot izvēlēties atmiņas bloku M1 vai M2. Rezultātu ir iespējams saglabāt pirms nākamā mērījuma vai pirms ierīce tiks izslēgta. Ja mērīšanas laikā, tiks konstatēts neregulārs pulsa ritms, simbols aritmija «♥», parādīsies pēc mērījumu beigām. Šo indikatoru var provocēt arī ķermeņa kustības mērīšanas laikā. Ja šis simbols parādās periodiski, apmeklējiet ārstu. Neatkarīgi no skaitliskās vērtības, spiediens ir arī redzams uz WHO skalas (Zīm. 10).

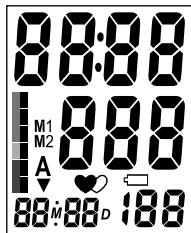

Att.8

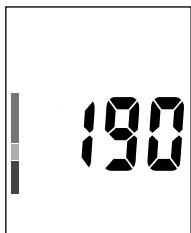

Att.9

WHO skala – trīskrāsu skala, kas attiecina arteriālā spiediena saņemto vērtību, saskaņā ar Pasaules Veselības Organizācijas rekomendācijām. Izmantojot skalu kreisajā displeja pusē, novērtējat savu rezultātu pēc sekojošās klasifikācijas: asinsspiediens ir normāls; asinsspiediens ir paaugstināts, vai tiek konstatēta arteriālās hipertensijas pakāpe.


6. Nospiediet  lai izslēgt ierīci. Lai veiktu jaunu mērījumu atkārtojiet visas aprakstītas darbības. Uzgaidiet 3 minūtes starp mērījumiem, lai atjaunot asins cirkulāciju. Ja ierīce ir ieslēgta un to neizmanto 3 minūtes, tā tiks izslēgta automātiski.

AUTOMĀTISKĀ PIEPŪŠANA


Pirmā asinsspiediena mērīšanas laikā manšete tiek uzpūsta līdz līmenim 190 mmHg. Ja šis spiediens ir nepietiekošs, lai izmērīt Jūsu spiedienu, ierīce piepūš manšeti līdz nākošām līmenim. Ierīcei ir 4 fiksētie līmeņi: 190, 230, 270 un 300 mmHg. Automātiskā piepūšana tiek atkārtota, kamēr mērījums nebūs sekmīgi pabeigts. Tas nav defekts.

PIESPIEDU GAISA IZLAIŠANA NO MANŠETES

Lai ātri atbrīvot manšeti no gaisa mērījumu laikā, nospiediet pogu . Manšete ātri un pilnīgi izpūtīsies un ierīce patstāvīgi izslēgsies.

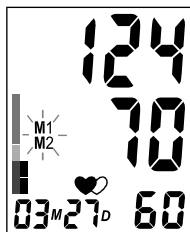

Att.10

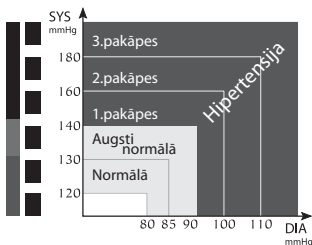


Att.11

ATMIŅAS FUNKCIJA

1. Katru mērījuma rezultātu (spiediena, pulsa, laika un datuma mērījumus) var saglabāt ierīces atmiņā. Šim nolūkam, pēc mērījumiem, ne vēlāk, kā 3 minūšu laikā, ir jāizvēlas atmiņa M1 vai M2. Ja parādās paziņojums par kļūdu, mērījuma rezultāts netiek saglabāts.

2. Katrās ierīces atmiņā var saglabāt līdz 90 mērījumu rezultātiem un pēdējo 3 mērījumu vidējo vērtību. Kad mērījumu skaits pārsniedz 90, vecākais ieraksts tiek dzēsts, lai saglabāt jaunākas vērtības.

3. Nospiediet pogu M1 (vai M2), lai redzētu atmiņā saglabātus rezultātus. Uzspiežot pogu M1 (vai M2) parādīsies pēdējo 3 mērījumu vidējā vērtība. Tā tiks atzīmētā ar simbolu «A» (zīm. 11). Pēc atkārtotas M1 (vai M2) pogas uzspiešanas, uz 1 sekundi parādīsies izvēlētais atmiņas M1 (vai M2) rezultāti (zīm. 12).

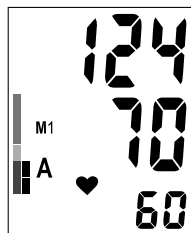


Att.12

Kad tiek parādīts mērījumu rezultāts, apakšējā līnija parādās datums un mērījuma laiks. Katra pogas M1 (vai M2) uzspiešana, novirza uz nākamo atmiņas šūnu.

ATMIŅAS DZĒŠANA

Lai izdzēstu visas vērtības, kas glabāti atmiņā, nospiediet pogu M1 (vai M2) un turiet to nospiestu ilgāk par 5 sekundēm. Simbols "Clr" parādīsies uz ekrāna, un visas vērtības tiks izdzēstas no atmiņas.

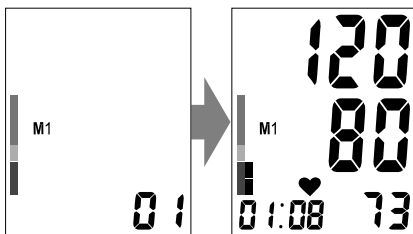

PIC.13

INFORMĀCIJA PAR KĻŪDĀM

SIGNĀLS	VISBIEŽĀKAIS CĒLONIS	KOREKCIJAS METODES
	Manšete tika uzlikta nepareizi vai gaisa caurules gals nav pietiekami cieši ievietots. Mērījumu nevar veikt, jo kustās rokas, vai pacients runā mērījumu laikā. Pie šādiem traucējumiem, kā smagā ateroskleroze, vājš pulss un arī pacientiem ar ievērojamiem sirds ritma traucējumiem.	Pārliedzinieties, ka manšete ir uzlikta pareizi un kontaktdakša ir cieši ievietota. Atkārtojiet visu mērīšanas procedūru. Atkārtojiet mērījumu stingri ievērojot šajā rokasgrāmatā norādītus ieteikumus. Šādos gadījumos konsultējies ar ārstējošo ārstu par elektroniskās ierīces piemērošanu.
	Baterijas ir izlādētās.	Nomainiet baterijas.

APKOPE, UZGLABĀŠANA, REMONTS UN UTILIZĀCIJA

1. Glabājiet ierīci prom no mitruma, tiešo saules staru, triecienu, vibrāciju iedarbībām. Šī ierīce nav ūdensnecaurīdīga!
2. Nelietojiet un neturiet ierīci tuvu apkures iekārtām un atklātām uguns.
3. Izņemiet baterijas, ja plānojat neizmantot ierīci ilgāku laiku. Noplūde no baterijām var sabojāt ierīci. Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā!

4. Turiet ierīci tīru un pasargātu no putekļiem. Izmantojiet sausu mīkstu salveti tīrīšanai.
5. Turiet ierīci un tās sastāvdaļas prom no ūdens, šķīdinātājiem, spirta un benzīna.
6. Sargājiet manšeti no asām lietām; nestiepiet un nespiediet manšeti.
7. Nepakļaujiet ierīci spēcīgiem satricinājumiem, piemēram, kritienam uz grīdu.
8. Šī ierīce nesatur īpašas pārbaudes, lai pārbaudītu mērījumu precizitāti. Aizliegts atvērt individuāli elektronisko bloku. Remontējiet ierīci tikai oficiālajā servisā.
9. Pēc garantija izbeigšanās, ik pa laikam, pārbaudiet ierīces tehnisko stāvokli oficiālajā servisā.
10. Likvidējiet ierīci tas sastāvdaļas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Ražotājam nav īpašas prasības par utilizāciju.
11. Manšete var izturēt vairākas sanitārās apstrādes. Manšetes iekšējo audu virsmu (kontaktā ar roku), var tīrīt ar vates tamponu, apstrādājot to ar ūdeņraža peroksīda 3% šķīdumu. Pēc ilgās lietošanas ir iespējama daļējā manšetes krāsu izbalēšana. Manšetes mazgāšana un gludināšana nav atļauta.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANAS PADOMI

PROBLĒMA	VISBIEŽĀKAIS CĒLONIS	KOREKCIJAS METODES
Pēc pogas uzspiešanas, nav norādes uz displeja	Baterijas Izlādējās. Netiek ievērota bateriju polaritāte. Bateriju kontakti ir piesārņoti.	Nomainiet baterijas. Ievietojiet baterijas pareizi. Notīriet kontaktus ar sauso salveti.
Uzpūšanās tiek pārtraukta un atjaunota.	Automātiska funkcija, lai iegūt pareizus mērījumus. Varbūt jūs runājat vai pārvietojat savu roku mērījuma laikā?	Skatīt Mērījumu procedūru. Nomierinieties un atkārtojiet mērījumu.
Katru reizi spiedienu ir savādāks. Spiediena mērījumu rezultāti ir pārāk zemi/augsti.	Pārbaudiet, vai manšete ir Jūsu sirds līmenī? Pārbaudiet, vai manšete ir pareizi uzlikta? Varbūt Jūsu rokas muskuļi ir saspringti? Varbūt jūs runājat vai pārvietojat savu roku mērījuma laikā?	Ieņemiet pareizu pozīciju mērīšanai. Ieņemiet pareizu pozīciju mērīšanai. Uzlieciet manšeti pareizi. Nerunājiet un nekustaties mērījumu laikā.
Pulsa mērījumu rezultāti ir pārāk zemi/augsti.	Varbūt jūs runājat vai pārvietojat savu roku mērījuma laikā? Varbūt Jūs veicat mērījumu uzreiz pēc fiziskās slodzes?	Nerunājiet un nekustaties mērījumu laikā. Atkārtojiet mērījumu pēc vismaz 5 minūtēm.

Nav iespējams veikt daudz mērījumus.	Slikto bateriju indikācija.	Lietojiet tikai pazīstamu ražotāju sārmu baterijas.
Spontānā izslēgšanās	Automātiskā izslēgšanas sistēma.	Tas nav defekts. Ierīce izslēdzas automātiski pēc 3 minūtēm no pēdējā mērījuma brīža.

Ja neatkarīgi no iepriekšminētiem ieteikumiem jūs nevarat iegūt pareizus mērījumu rezultātus, pārtrauciet izmantot šo ierīci un sazināties ar oficiālo servisu (adrese un telefonus var atrast garantijas kartē). Nemēģiniet pats salabot ierīci!

GARANTĪJA

1. Uz šo LD produktu attiecas 60 mēnešu garantija no tās iegādes dienas
2. Garantijas saistības ir aprakstītas garantijas kartē, kas tiek dota pie šīs ierīces pārdošanas pircējam.
3. Oficiālā servisa adrese un kontakti ir atrodami garantijas kartē.

TEHNISKIE DATI

Mērīšanas metode	Oscilometriskā ar Fuzzy algoritmu
Displejs	LCD
Spiediena indikatora diapazons manšetē, mmHg	No 0 līdz 300
Mērījumu diapazons: spiediens manšetē, mmHg puls, 1/min	no 40 līdz 260 no 40 līdz 160
Pieļaujamā absolūtā mērījumu kļūda: Spiediens manšetē, mmHg Pulsa mērīšana, %	±3 ±5
Datums un laiks	ir
Atmiņa	2x90 + vidējā vērtība
Enerģijas avots, V	3
Energoapgādes veids	2 "AAA" tipa baterijas
Max jaudas patēriņš, W	1,5

Darbības apstākļi: Temperatūra, °C Relatīvais gaisa mitrums, % Rh	no 10 līdz 40 85 un zemāk
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi: Temperatūra, °C Relatīvais gaisa mitrums, % Rh	no -20 līdz 50 85 un zemāk
Manšete:	CUFF-LD12 (izmērs 12,5 – 20,5 cm)
Izmēri: Izmērs (elektroniskais bloks), mm Svars (bez iepakojuma, futlāra, baterijām un adaptera), g	66 x 70 x 32 118
Izgatavošanas gads	Izgatavošanas gads ir atrodams ierīces apakšā, sērijas numurā aiz burtiem AA
Komplektācija	galvenā ierīce, 2 AAA baterijas, lietošanas instrukcija, garantijas karte, futlāris

SIMBOLI:

 0123 Atbilst Eiropas Direktīva MDD 93/42 / EEC



Svarīgi: izlasiet instrukciju



Izplatītājs Eiropā



Ražotājs



II Tips



BF tips

SERTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA

Šīs ierīces ražošana ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 13485: 2003.

Ierīce atbilst Eiropas Direktīvas MDD 93/42/EEC, starptautiskiem standartiem, EN980.

✉ Sūdzības un prasības jāadresē:

Little Doctor Europe Sp. z o.o. OFICIĀLĀM PĀRSTĀVIM LATVIJĀ:

SIA "Qualita Centrale", Kuģu iela 11-305, Rīga, LV-1048.

Servisa Centrs +371 25220232

Ražots zem kontroles: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road # 09-02 Parklane Shopping Mall, Singapore 188307

Ražotājs: Little Doctor Electronic (Nantong) Co Ltd., Nr.8, Tongxing Ceļu Ekonomikas un tehniskās attīstības zona, Nantong 226010, Jiangsu, Ķīnas Tautas Republika

Izplatītājs Eiropā: Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street, 30-390, Kraków, Poland

Tālrunis: +48 12 2684746, 12 2684747, fakss: +48 12 268 47 53 E-pasts: biuro@littledoctor.pl www.LittleDoctor.pl

Little Doctor Europe Sp. z o.o. OFICIĀLĀIS PĀRSTĀVIS LATVIJĀ:

SIA "Qualita Centrale", Kuģu iela 11-305, Rīga, LV-1048.

Servisa Centrs: +371 25220232

www.LittleDoctor.pl

CE 0123



LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE. LTD.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699,
Fax: 65-62342197, E-mail: ld@singaporemail.com



Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

* Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.
© Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2016

E536/1611/08