

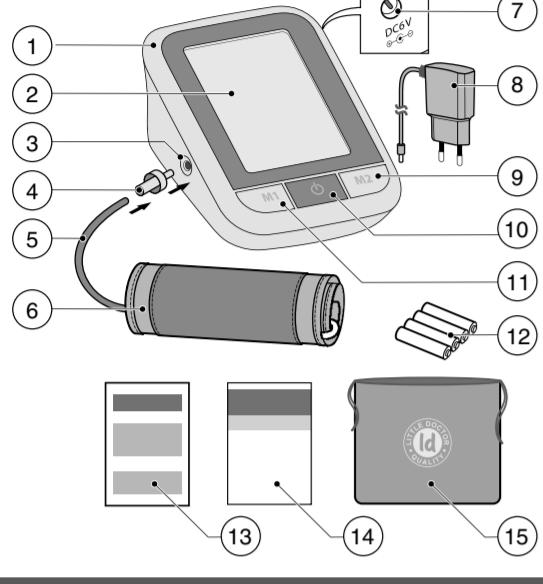
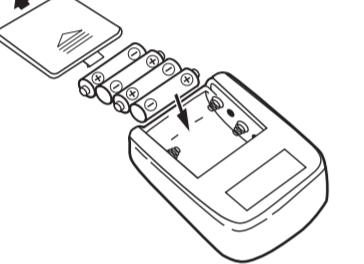
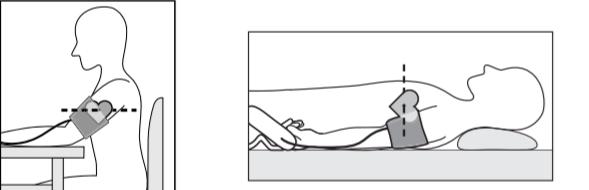
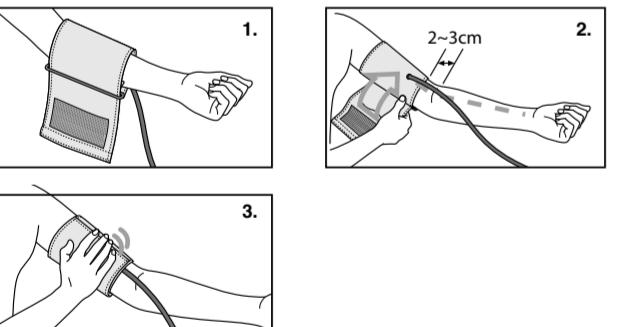
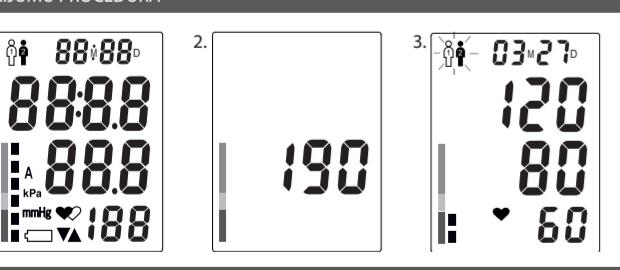
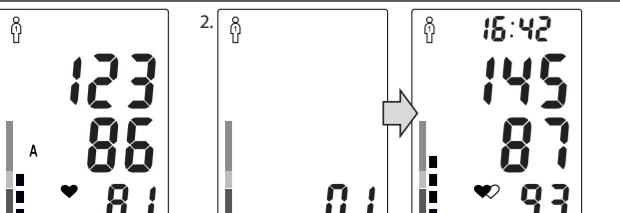
LÚZIATELSKÝ NÁVOD K DIGITÁLNÍM TONOMETRU LD51, LD51A, LD51U

NAUDÓJMO INSTRUKCIA SKAFTENINIO KRAUJOSPUDŽIO MATUOKLIO LD51, LD51A, LD51U

LIETOŠANAS INSTRUKCJA ASINSSPIEDENA MÉRÍTÁJS LD51, LD51A, LD51U

KASUTUJUHEND VERERÓH - JA PULSISAGEDUSE- DIGITALNE MÖÖTJA LD51, LD51A, LD51U

ИНСТРУКЦИЯ 3 ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИЧУ ТА НАСТОТИ ПИЛЬСУ ЦИФРОВИЙ LD51, LD51A, LD51U

obr.1 pav. 1 zim. 1 1. plit man. 1
NÁZEV SOÚČÁSTEK A KOMPONENTŮ
PAGRUNDINÉ DALYS IR KOMPONENTAI
DETAĽAS UN SASTĀVDĀLĀSobr.2 pav. 2 zim. 2 2. plit man.2
UMÍSTĚNÍ BATERÍ MAINTINIMO ELEMENTU KEITIMAS BATERIJE IĒVIETOŠANAobr.3 pav. 3 zim. 3 3. plit man. 3
SPRÁVNÁ POLOHA PŘI MĚŘENÍ PRZYJĘCIE POZYCIJI UMÓŻLIWIĄCEJ POMIAR PRAWILNA POZA PRZY BIMIROWANIobr.4 pav. 4 zim. 4 4. plit man. 4
PŘÍPRAVA MANŽETY RAKNOVÉS UZДЕЖИМAS ПІДГОТОВКА МАНЖЕТЫ ANSETES SAGATAVOŠANAobr.5 pav. 5 zim. 5 5. plit man.5
PROCEDURA POMIARU MÓÖTMISVIIS ПОРЯДОК ВИМІРЮВАННЯobr.6 pav. 6 zim. 6 6. plit man. 6
FUNKCE PAMETI ATMININTIS FUNKCIJA ATMINIAS FUNKCIJA

CZ

NAZEV SOUČÁSTEK A KOMPONENTU (obr.1)

- ① ELEKTRICKÝ BLOK.
- ② displej Z TEKUTÝM KRISTYAL KLCD.
- ③ PŘÍPOJKA PRO ZÁSUVKU MANŽETY.
- ④ KONEKTOR VZDUCHOVÉ HADÍCKY.
- ⑤ VZDUCHOVÁ HADÍCKA.
- ⑥ MANŽETA.
- ⑦ PŘÍPOJKA PRO ZAPŘIJENÍ ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPÄJENIA.
- ⑧ ŽARŪCNÝ LIST.
- ⑨ TAKSA.
- ⑩ TLAČÍTKO M2 (PAMET).
- ⑪ TLAČÍTKO O1 (START/STOP).
- ⑫ TLAČÍTKO M1 (PAMET).
- ⑬ PAPRIKA PRIVYK.
- ⑭ NAVOD K POUŽITÍ.

VÝSEOBECNÉ ÚDaje

Ten to návod je určen k poskytování užívateľom pomoc pri bezpečnosti a efektívnej používaní automatického digitálneho pristreja pre meranie krevného tlaku a tepovej frekvencie (rešením LD51, LD51A, LD51U) alebo v extreme (pri: PRÍSTREJO). Pristrej sa smi používať v souladu s oprávneným a nemôže sa aplikovať po účeli, ktoré nie sú popísané.

POKYN PRO POUŽITÍ

Pristrej je určen k meraniu systolického a diastolického krevného tlaku a zjistovaniu tepovej frekvencie u pacientu v veku od 15 let. Pristrej sa doporučuje používať pacientom s nesplňaním (predmetným) krevným tlakem resp. tzv. arteriálnu hypertenziu za domácom podmienkom ako dodatek k zdravotníckemu dôchodu.

POKYN PRO POUŽITÍ

Mérí aplikuje oscilometrickou metódu merenia krevného tlaku a tepovej frekvencie (rešením LD51, LD51A, LD51U) alebo v extreme (pri: PRÍSTREJO).

Prístroj sa smi používať v souladu s oprávneným a nemôže sa aplikovať po účeli, ktoré nie sú popísané.

Zároveň je treba dôraz kladený na dôsahu pre príslušného užívateľa.

Nájdete predtisť v celom článku.

Nájdete predtisť v celom článku

