

LD-60, LD-61, LD-70, LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80, LD-100

Little Doctor®

GR

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Οδηγίες Χρήσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τον χρήστη στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Χρησιμοποιούστε αυτή τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς. Διαβάστε και κατανοήστε ολόκληρο το Εγχειρίδιο Οδηγιών, ιδιαίτερα την παράγραφο “Συμβουλές ορθής μέτρησης”.

ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΧΡΗΣΗΣ


Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης του ανθρώπου σύμφωνα με τη μέθοδο Korotkov. Η συσκευή συνιστάται να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες κλινικών και νοσοκομείων, καθώς και σε συνθήκες οικιακής χρήσης ως συμπλήρωμα στην ιατρική παρακολούθηση. Η πίεση μετράται με ακρόαση των τόνων του Korotkov με στήθοσκοπιο και με ανάνηψη μετρήσεων στο μανόμετρο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΡΘΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το γιατρό σας εάν υποβληθείτε σε θεραπεία με αιμοκάθαρο ή αντιπηκτικά, αντιθρομβοκυττάρια ή στεροειδή. Η χρήση της συσκευής σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει εσωτερική αιμορραγία.

2. Για τη σωστή μέτρηση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Η πίεση του αίματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είναι συνήθως χαμηλότερη το καλοκαίρι και υψηλότερη το χειμώνα. Η πίεση του αίματος ποικίλλει και εξαρτάται από τη φυσική σας κατάσταση, τα συναισθήματά σας, τον ενθουσιασμό σας, τον άγχος και τις διατροφικές σας συνήθειες. Η χρήση φαρμάκων, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και το κάπνισμα μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια της μέτρησης. Καθώς η πίεση του αίματος τείνει να αυξάνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, κάντε μετρήσεις σε εσωτερική θερμοκρασία (περίπου 20 °C). Εάν η συσκευή παραμένει σε χαμηλή θερμοκρασία, κρατήστε την για τουλάχιστον 1 ώρα σε εσωτερική θερμοκρασία πριν από τη χρήση, διαφορετικά το αποτέλεσμα μέτρησης ενδέχεται να είναι λανθασμένα. Κατά τη διάρκεια μιας ημέρας η διαφορά στις μετρήσεις για τους υγιείς ανθρώπους μπορεί να είναι 30-50 mmHg συστολικής πίεσης και έως 10 mmHg διαστολικής πίεσης. Τα όρια πίεσης, μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το άτομο, την ηλικία, κτλ. Συνεπώς, συνιστάται να φυλάσσεται ένα ειδικό βιβλίο με αρχεία μετρήσεων αρτηριακής πίεσης. ΜΟΝΟ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ.

3. Για καρδιαγγειακές και ορισμένες άλλες παθήσεις που απαιτείται παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, πραγματοποιείτε τις μετρήσεις στις ώρες που καθορίζει ο θεράπων ιατρός σας. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΠΩΣ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ Ο ΙΔΙΟΣ. Η ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΣΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΣΑΣ.

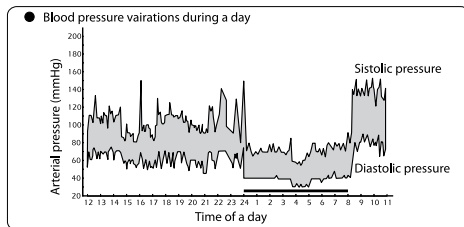


Εικ.1

4. ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΗΡΕΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΦΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΩΡΑ. ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,5 – 2 ΩΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΠΝΙΣΤΕ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΠΟΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ.


5. Η ακρίβεια της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης εξαρτάται από το αν η περιχειρίδα ταιριάζει με το μέγεθος του χεριού σας. Η περιχειρίδα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μικρή ούτε πολύ μεγάλη.

6. Περιμένετε 3 λεπτά μεταξύ των μετρήσεων για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία του αίματος. Ωστόσο, τα άτομα με εμφανή αρτηριοσκλήρωση λόγω σημαντικής απώλειας αγγειακής ελαστικότητας μπορεί να χρειαστεί να αυξήσουν τον χρόνο αναμονής μεταξύ των μετρήσεων (10-15 λεπτά). Αυτό αναφέρεται επίσης στους ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη. Για ακριβέστερο προσδιορισμό της πίεσης του αίματος συνιστάται να κάνετε μια σειρά τριών διαδοχικών μετρήσεων και να χρησιμοποιήσετε τη μέση τιμή.

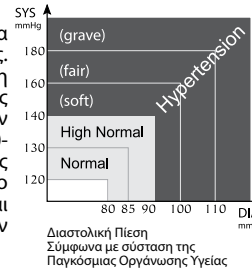

Εικ.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

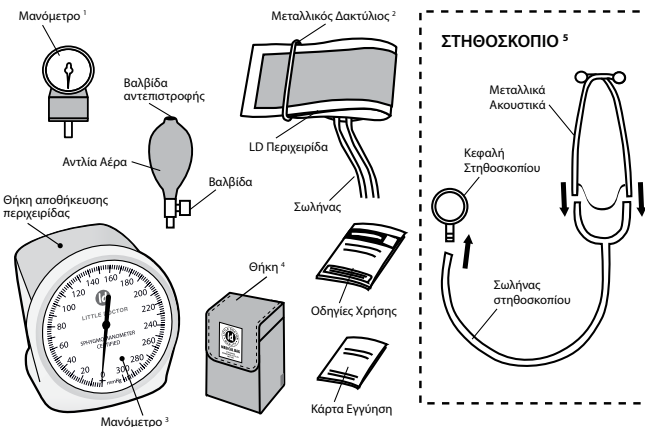

1 Για τα μοντέλα LD-60, LD-61, LD-70, LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80

2 Για τα μοντέλα LD-60, LD-70, LD-71, LD-71A, LD-100


3 Για το μοντέλο LD-100

4 Για τα μοντέλα LD-60, LD-61, LD-70, LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80

5 Για τα μοντέλα LD-60, LD-61, LD-71, LD-71A, LD-100


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ

1. Εισάγετε το άκρο της περιχειρίδας για περίπου 5 cm στο μεταλλικό δακτύλιο όπως φαίνεται στην εικόνα. 3.

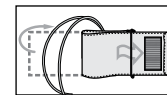


Εικ. 3

2. Εφαρμόστε την περιχειρίδα στον αριστερό σας βραχίονα έτσι ώστε ο σωλήνας αέρα να κατευθύνεται προς την παλάμη σας. Εάν η μέτρηση στο αριστερό σας χέρι είναι δύσκολη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δεξί σας χέρι. Σε αυτή την περίπτωση να θυμάστε ότι οι μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν κατά 5-10 mmHg και ακόμη περισσότερο.

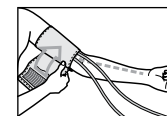


Εικ. 4

3. Τυλίξτε την περιχειρίδα γύρω από τον βραχίονα σας έτσι ώστε το κάτω μέρος της να είναι περίπου 2-3 cm πάνω από τον αγκώνα σας. Το σύμβολο “ARTERY” πρέπει να είναι πάνω από την αρτηρία του βραχίονα.

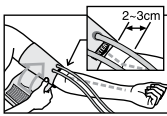


Εικ. 5

4. Στερεώστε την περιχειρίδα έτσι ώστε να εφαρμόζει σφιχτά στο βραχίονα, αλλά όχι υπερβολικά. Η υπερβολικά σφιχτή ή πολύ ελεύθερη τοποθέτηση της περιχειρίδας μπορεί να δώσει ανακριβείς μετρήσεις.

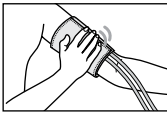


Εικ. 6

5. Όταν, το σύμβολο «INDEX» βρίσκεται ακριβώς κάτω από την περιοχή που αναγράφει «NORMAL (25-36 cm)». Σημαίνει ότι η περιχειρίδα τοποθετήθηκε σωστά και ταιριάζει στο μέγεθος του άνω βραχίονα σας.

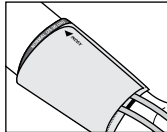


Εικ. 7

6. Εάν ο βραχίονας έχει κωνική μορφή, η περιχειρίδα πρέπει να τοποθετηθεί με κυκλική κίνηση όπως φαίνεται στο σχήμα.

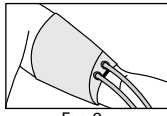


Εικ. 8

7. Εάν το μανίκι της μπλούζας σας συμπιέσει το βραχίονα τότε παρεμβάλλεται η ελεύθερη ροή αίματος με αποτέλεσμα η συσκευή να δώσει ανακριβείς αποτελέσματα που δεν αντιστοιχούν στην πραγματική σας αρτηριακή πίεση.

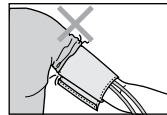

Εικ. 9

8. Τοποθετήστε την κεφαλή στήθοσκοπιού έτσι ώστε να βρίσκεται λίγο υψηλότερα από την καμπύλη του αγκώνα (Εικ. 4). Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ενσωματωμένο στήθοσκοπιο (για τα μοντέλα LD-60 και LD-71A), για να επιτύχετε καλύτερη ακρόαση του παλμού, η περιχειρίδα μπορεί να περιστραφεί (60-90 °) ώστε η κεφαλή του στήθοσκοπιού να τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά του χεριού (πιο κοντά στο σώμα).

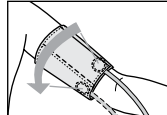

Εικ. 10

9. Η πίεση μετράται σε καθιστή ή ξαπλωμένη θέση. ΟΤΑΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΨΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΣΤΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΙ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Εισάγετε τα ακουστικά του στήθοσκοπιού στα αυτιά σας. Κλείστε την βαλβίδα αέρα της αντλίας, περιστρέφοντάς την προς τα δεξιά. Πιέστε την αντλία ώστε να γεμίσετε με αρκετό αέρα την περιχειρίδα έως ότου ακούσετε τον παλμό. Αφού σταματήσετε και ακούτε τον παλμό, ξανά πιέστε την αντλία ώστε να εισάγετε στην περιχειρίδα ακόμη λίγο αέρα κατά 30 mm Hg.
- Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα αέρα, γυρίζοντας την αριστερόστροφα. Παρατηρήστε ότι η πίεση στην περιχειρίδα θα πέσει με ταχύτητα 2-4 mm Hg ανά δευτερόλεπτο. Αυτό είναι απαραίτητο για να έχετε ακριβή αποτελέσματα.
- Μόλις ακούσετε δυνατούς παλμούς, δείτε την αριθμηση του μανομέτρου. Αυτή είναι η συστολική σας (άνωτηρη), αρτηριακή σας πίεση.
- Η πίεση στην περιχειρίδα θα μειώνεται καθώς συνεχίζετε με την ίδια ταχύτητα (2-4 mm Hg ανά δευτερόλεπτο). Συνεχίζετε να ακούτε παλμούς. Οι ήχοι που ακούτε θα αλλάξουν. Σε αντίθεση με τους πρώτους παλμούς, θα γίνουν πιο ήπιοι. Τη στιγμή που σταματάτε να ακούτε πλέον τον παλμό, απομνημονεύστε την ανάνηψη του μανομέτρου. Αυτή είναι η διαστολική αρτηριακή σας πίεση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

- Φυλάξτε τη συσκευή από την έκθεση σε υγρασία, άμεσο ηλιακό φως, κραδασμούς και πτώσεις. 2. Μην κρατάτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και φωτιάς. 3. Κρατήστε τη συσκευή καθαρή και προστατέψτε την από τη σκόνη. 4. Η έκθεση της συσκευής σε επιθετικές λύσεις δεν επιτρέπονται. 5. Προστατέψτε την περιχειρίδα και τους σωλήνες αέρα από την επαφή με

- αιχμηρά αντικείμενα. 6. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει ειδικά στοιχεία ελέγχου για να ρυθμίσετε την ακρίβεια μέτρησης. Το άνοιγμα του μανομέτρου απαγορεύεται. Επισκευάστε τη συσκευή μόνο σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες.
7. Η διάρκεια ζωής της συσκευής αναφέρεται στην ενότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η διάρκεια ζωής καθορίζεται από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη. Πριν την εκπονή της εγγυημένης διάρκειας ζωής, ζητήστε από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες να ελέγξουν την τεχνική κατάσταση της Συσκευής.
8. Απορρίψτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την απόρριψη της παρούσας συσκευής από τον κατασκευαστή.
9. Η περιχειρίδα μπορεί να καθαριστεί. Η εσωτερική επιφάνεια της περιχειρίδας (που έρχεται σε επαφή με τον βραχίονα) μπορεί να καθαριστεί με βαμβάκι εμποτισμένο με διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 3%. Σε μακρά χρήση είναι δυνατή η μερική χρωματική εξασθένηση της επιστρώσης της περιχειρίδας. Το πλύσιμο και το σιδέρωμα της περιχειρίδας δεν επιτρέπονται.

ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Το ακόλουθο προϊόν LD καλύπτεται από εγγύηση για την περίοδο που καθορίζεται στο κάρτα εγγύησης.
2. Η περίοδος εγγύησης για τη περιχειρίδα βραχίονα είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης.
3. Οι υποχρεώσεις εγγύησης επισημοποιούνται με την κάρτα εγγύησης κατά την πώληση του προϊόντος στον αγοραστή.

Τις διευθύνσεις των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες εγγύησης μπορείτε να τις βρείτε στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ »ή στην ιστοσελίδα www.littledoctor.sg.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος μέτρησης πίεσης, mmHg	Από 0 έως 300
Κλίμακα ένδειξης πίεσης, mmHg	Από 0 έως 300
Εύρος επιτρεπτού σφάλματος στη μέτρηση της πίεσης, mmHg	±3
Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία, °C Σχετική Υγρασία, % Rh	από 10 °C έως 40 °C 85% και λιγότερο
Συνθήκες Αποθήκευσης, Μεταφοράς: Θερμοκρασία, °C	Από - 34 έως 65 85% και λιγότερο
Βάρος(χωρίς τη θήκη μεταφοράς): Μοντέλο LD-70 / LD-70NR, g Μοντέλο LD-71, LD-71A, g Μοντέλο LD-60 / LD-61, g Μοντέλο LD-80, g Μοντέλο LD-100, g	264/237 328 390/309 351 464
Διαστάσεις (συσκευασίας), mm Μοντέλο LD-70 / LD-70NR, Μοντέλο LD-71, LD-71A, Μοντέλο LD-60 / LD-61, Μοντέλο LD-80 Μοντέλο LD-100	115 x 185 x 75 173 x 135 x 140
Έτος κατασκευής	Το έτος κατασκευής δίνεται στο κάτω μέρος της συσκευής σε σειριακό αριθμό μετά τα σύμβολα «AA».
Χώρα κατασκευής	PRC

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

		Ποσότητα							
Ονομασία	Σύνθεση	LD-60	LD-61	LD-70	LD-70NR	LD-71	LD-71A	LD-80	LD-100
Μανόμετρο	Μανόμετρο LD-S013	1	1	1	1	1	1	1	1
Περιχειρίδα ενηλίκων με μεταλ. δακτύλιο	Cuff N2AR Περιχειρίδα LD-S02A	–	–	1	–	1	1	–	–
Περιχειρίδα ενηλίκων με μεταλ. δακτύλιο	Cuff N2A Περιχειρίδα LD-S02A	–	–	–	1	–	–	–	–
Μεγάλη Περιχειρίδα ενηλίκων με μεταλ. δακτύλιο	Cuff N2LR Περιχειρίδα LD-S02L	1	–	–	–	–	–	–	–
Παιδική Περιχειρίδα	Cuff C2C Περιχειρίδα LD-S02C	–	–	–	–	–	–	1	–
Παιδική Περιχειρίδα	Cuff N2C Περιχειρίδα LD-S02C	–	1	–	–	–	–	–	–
Περιχειρίδα για βρέφη	Cuff C2N Περιχειρίδα LD-S02N	–	–	–	–	–	–	1	–
Περιχειρίδα για βρέφη	Cuff C2I Περιχειρίδα LD-S02I	–	–	–	–	–	–	1	–
Ενσωματωμένο Στηθοσκόπιο	LD Prof-Plus	1	–	–	–	–	–	1	–
Στηθοσκόπιο	LD Prof-Plus	–	1	–	–	1	–	–	–
Αντλία αέρος	LD-S014, LD-S015, LD-S016	1	1	1	1	1	1	1	1
Θήκη	Θήκη LD-S059	1	1	1	1	1	1	1	1
Οδηγίες Χρήσεως	Οδηγίες Χρήσεως	1	1	1	1	1	1	1	–
Κάρτα Εγγύησης	Κάρτα Εγγύησης	1	1	1	1	1	1	1	1
Συσκευασία	Συσκευασία	1	1	1	1	1	1	1	1

ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μοντέλο LD-70 Μοντέλο LD-71 Μοντέλο LD-71A Μοντέλο LD-100	ενηλίκων	25 έως36 εκ
Μοντέλο LD-70NR	ενηλίκων	25 έως40 εκ
Μοντέλο LD-60	Ενηλίκων-μεγάλη	33 έως 46 εκ
Μοντέλο LD-61	Παιδικά	18 έως 26 εκ
Μοντέλο LD-80	Νεογέννητα Βρέφη Παιδικά	7 έως 12 εκ 11 έως 19 εκ 18 έως 26 εκ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Η κατασκευή αυτής της συσκευής είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 13485:2003.

✉ **Παράπονα και αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στην:**

Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street, 30-390, Krakow, Poland Service phone: +48 12 2684748, 2684749

Κτασκευασμένα προϊόντα υπό τον έλεγχο της:

Little Doctor International (S) Pte. Ltd., Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore.

Κατασκευαστής:

Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, Nantong 226010, Jiangsu.

Αντιπρόσωπος Ευρώπης:

Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street, 30-390, Kraków, Poland Sales Office phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53 E-mail: biuro@littledoctor.pl www.LittleDoctor.pl

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Μοντέλο	Ημερομηνία Πώλησης
Σειριακός Αριθμός	Περίοδος Εγγύησης
Όνομα αγοραστή	
Υπογραφή πωλητή	Σφραγίδα της εταιρείας πώλησης
Συμπληρώνεται από τον εκπρόσωπο του εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις	
Ημερομηνία	Σημειώσεις σχετικά με τη συντήρηση

www.LittleDoctor.sg



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China



Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland