

LD Cardio

Little Doctor®

Стетоскоп LD

Руководство по эксплуатации

RUS

Стетоскоп LD

Інструкція з експлуатації

UKR

Стетоскоп LD

Пайдалану жөніндегі басшылық құжат


KAZ



! ВАЖЛИВО!

Перед використанням стетоскопа уважно вивчіть цю інструкцію з експлуатації.

Найменування частин і компонентів

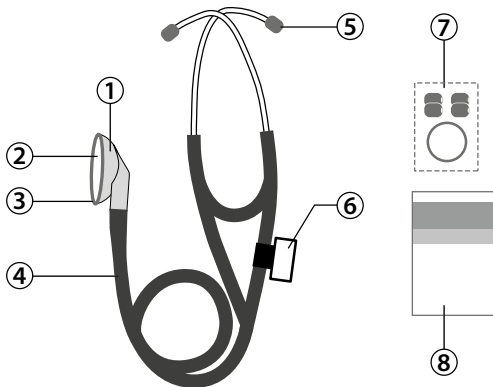

1. *Голівка до стетоскопу*
2. *Мембрана для стетоскопу*
3. *Пластикове кільце*
4. *Трубка медична сполучна із внутрішньою пружиною та вбудованою бінауральною трубкою*
5. *Вушні наконечники*
6. *Іменна табличка*
7. *Додатковий комплект приладдя*
8. *Інструкція з експлуатації з гарантійним талоном*

Загальні відомості

LD Cardio – це високоякісний кардіологічний стетоскоп для лікарів.

LD Cardio дозволяє провадити аускультацию у всьому діапазоні частот у дорослих та дітей. Спеціальна геометрія голівки і матеріал мембрани дозволяє акцентувати увагу при аускультатії в середньому діапазоні, що особливо важ-

ливо для вислуховування тонів серця. Частотна характеристика стетоскопа в діапазоні 200-500 Гц має унікальну для стетоскопів цього класу чутливість.



LD Cardio має високоякісну акустичну систему передачі звуку від мембрани до вух лікаря. Голівка стетоскопу і звукопровідна трубка мають два звукопровідних канали, окремо для кожного вуха. Обидва звукопровідних канали об'єднані в єдине ціле для виключення шумів тертя один об одний. Матеріал звукопровідної трубки, оптимальна твердість доданих вушних наконечників і точність з'єднання частин стетоскопу – максимально виключає сторонні і власні шуми при його використанні.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

№	Найменування	Кіль-сть	Модель	Примітка
1	Голівка до стетоскопу	1 шт.	LD-S044	з мембраною
2	Трубка медична сполучна	1 шт.	LD-S043	з внутрішньою пружиною та вбудованою бінауральною трубкою
3	Вушні наконечники (м'які)	1 пара	LD-S046	
4	Вушні наконечники (м'які)	2 пари	LD-S046	входить до додаткового комплекту приладдя
5	Мембрана	1 шт.		входить до додаткового комплекту приладдя
6	Футляр для дод. приладдя	1 шт.		входить до додаткового комплекту приладдя
7	Іменна табличка	1 шт.		
8	Інструкція з експлуатації з гарантійним талоном	1 шт.		
9	Упаковка	1 шт.		

Технічні характеристики

Виконання	LD Cardio
Діаметр мембрани	44 мм
Довжина трубки	56 см
Умови експлуатації: температура відносна вологість	від 10 °C до 40°C 85% та нижче
Умови зберігання і транспортування: температура відносна вологість	від мінус 34 °C до 50°C 85% та нижче
Габаритні розміри в упаковці	440(д) x 180(ш) x 43(в) мм
Маса без упаковки	200 г
Термін служби	7 років
Рік виробництва	Рік виробництва зазначений на упаковці

РОЗШИФРОВКА СИМВОЛІВ:



Відповідність Директиві Євросоюзу



Представник в Євросоюзі



Виробник



Важливо: Прочитайте інструкцію



Знак відповідності України



Дата виробництва: YYYY – рік,
MM – місяць (вказано на упаковці)



Берегти від вологи

Дата редакції цієї Інструкції з експлуатації вказана на останній сторінці у вигляді IXXX/YYMM/NN, де YY – рік, MM – місяць, а NN – номер редакції.

Виробництво приладів сертифіковане за міжнародним стандартом ISO 13485.

Прилад відповідає Європейській директиві MDD 93/42/EEC, вимогам ДЕРЖСТАНДАРТ Р 50444-92 Держстандарту Росії.

Відповідає вимогам Технічного регламенту України щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013р №753.

Догляд, зберігання, ремонт і утилізація

ВАЖЛИВО!

1. Стетоскоп необхідно оберігати від підвищеної вологості, прямих сонячних променів, ударів.
2. Не зберігаєте та не використовуйте стетоскоп у безпосередній близькості від нагрівальних приладів та відкритого вогню.
3. Оберігайте стетоскоп від забруднення.
4. Не допускається зіткнення стетоскопа з агресивними розчинами.
5. За необхідності здійснюйте ремонт тільки в спеціалізованих організаціях. Адреси організацій, що здійснюють гарантійне обслуговування зазначені в гарантійному талоні.
6. Після закінчення встановленого терміну служби необхідно періодично звертатися до фахівців (спеціалізовані ремонтні організації) для перевірки технічного стану стетоскопу.
7. При утилізації керуйтеся діючими на цей час правилами у Вашому регіоні. Спеціальних умов утилізації виробником не встановлено.

Гарантійні зобов'язання

1. На даний стетоскоп встановлено гарантійний термін протягом 24 місяці з дати продажу.
2. Гарантійні зобов'язання оформлюються гарантійним талоном при продажу приладу покупцеві. Гарантійний талон розташований на останній сторінці цієї інструкції.
3. Гарантія не поширюється на товари, які вийшли з ладу і/або отримали дефекти внаслідок: застосування не за призначенням; необережного використання, що призвело до пошкоджень; модифікації; ремонту неуповноваженою установою (приватною особою); порушення правил експлуатації, і/або зберігання, та/або транспортування; дій третіх осіб або непереборної сили.

Вимагайте заповнення гарантійного талона торгівельною установою при покупці стетоскопа.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УКРАЇНА: Безкоштовна інформаційна лінія 0-800-30-12-08

Виробник і уповноважені представники

Продукт компанії: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapore (Літл Доктор Інтернешнл (С) Пте. Лтд., 7500А, Біч Род, 11-313 Зе Плаза 199591, Сінгапур). Поштова адреса: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699 (Ішун Централ, Поштова скринька 9293, Сінгапур, 917699).

Експортер: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Літл Доктор Інтернешнл (С) Пте. Лтд.)

Виробник: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PR China (Літл Доктор Електроник (Нантонг) Ко., Лтд., Ном. 8, Тонгксінг Род Економіка енд Текнікал Девелопмент Еріа, 226010 Нантонг, Джіангсу, КНР).

Уповноважений представник в Україні: Приватне підприємство „Торгівельно-промислова компанія „Ергоком” вул. Довженка, 10, м. Київ, 03057, Україна. Тел./факс: (+38 044) 492-79-55/ (+38 044) 404-48-67. Email: info@ergocom.ua www.ergocom.ua

Інформація про медичну техніку марки LD в Інтернеті (технічні характеристики, функціональні особливості, умови експлуатації, зберігання та гарантійного обслуговування): www.littledoctor.ua

✉ Претензії споживачів та побажання надсилати за адресою офіційного імпортера:

Україна: а/с 123 м. Київ, 03049, „Ергоком” ТПК ПП

Тел. безкоштовної гарячої лінії: 0-800-30-12-08

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ /
НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ /
САУДА ҰЙЫМЫНЫҢ АТАУЫ МЕН МЕКЕН-ЖАЙЫ

ДАТА ПРОДАЖИ / ДАТА
ПРОДАЖУ / САТЫЛҒАН КҮНІ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА /
ПІДПИС ПРОДАВЦЯ /
САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ

ПЕЧАТЬ (ШТАМП) ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ /
ПЕЧАТКА (ШТАМП) ТОРГІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ /
САУДА ҰЙЫМЫНЫҢ МӨРІ (МӨРТАБАНЫ)

Внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил:

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, зовнішній вигляд перевірів, товар в повній комплектації одержав:
Кепілдемелік қызмет көрсету Шарттарымен таныстым, сыртқы түрін тексердім, толық жиынтығындағы товарды қабылдап алдым:

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ /
ПІДПИС ПОКУПЦЯ /
САТЫП АЛУШЫНЫҢ ҚОЛЫ

www.LittleDoctor.sg

